



ANKYLOS[®]

Каталог продукции

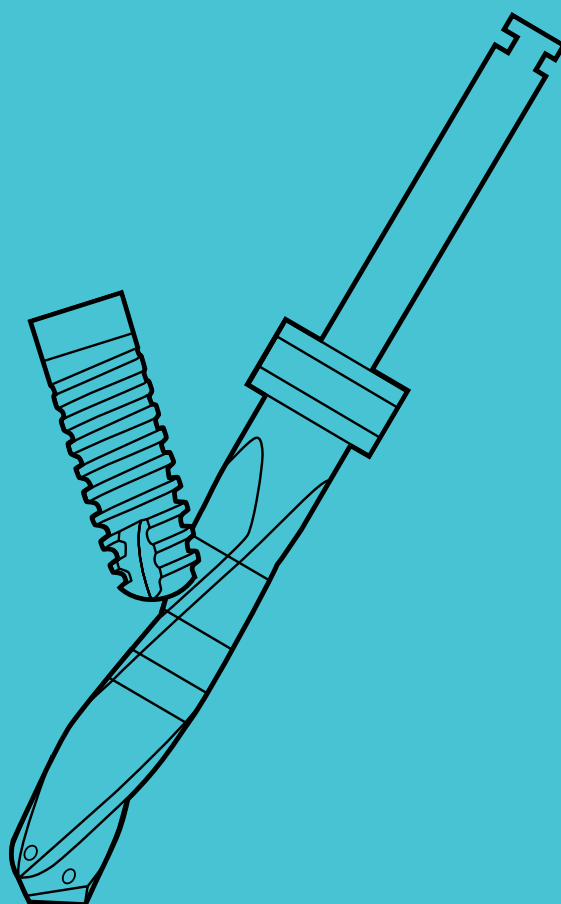

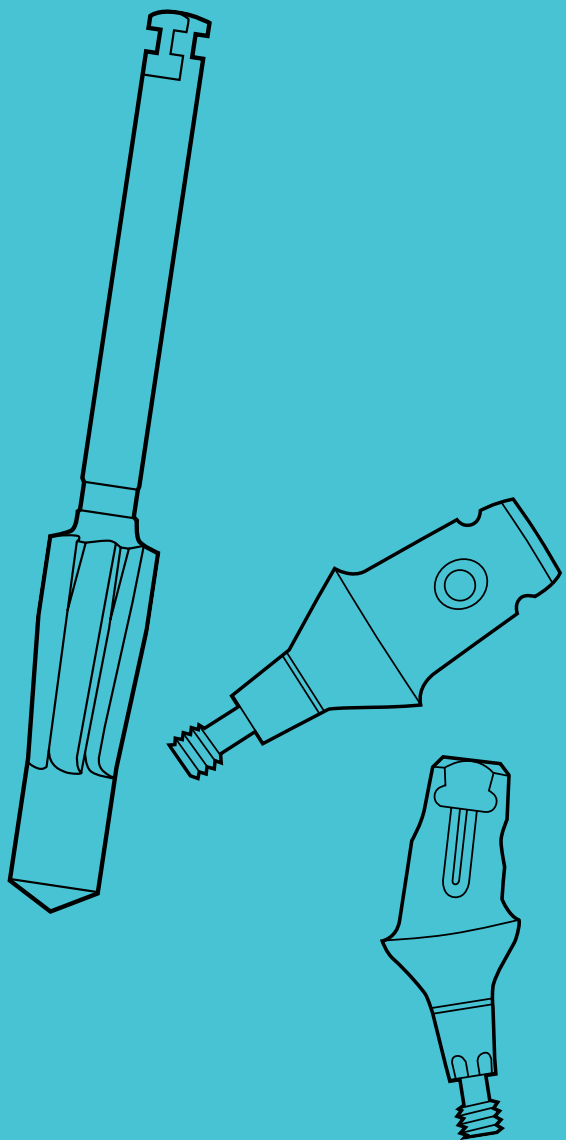

Имплантаты ANKYLOS® C/X с возможностью направленного позиционирования: откройте для себя концепцию максимальной протекции тканей

Имплантаты ANKYLOS® C/X с возможностью направленного позиционирования: откройте для себя концепцию максимальной протекции тканей

Преимущества системы имплантатов ANKYLOS® C/X:

- Возможность выбора между ортопедическими компонентами C/ –без направляющего шестигранника и /X – с направляющим шестигранником для более простого и точного позиционирования абатментов
- Новая упаковка позволяет с легкостью визуально определить тип плеча имплантата
- Новая упаковка с двойной защита стерильности имплантата для еще большей безопасности

СОДЕРЖАНИЕ ХИРУРГИЯ

Имплантаты ANKYLOS®	4
Хирургические инструменты ANKYLOS®	6
Навигационная хирургия с системой ExpertEase™	10
Хирургические наборы ANKYLOS®	16
Аксессуары, физиодиспенсер	15

ОРТОПЕДИЯ

СНЯТИЕ ОТТИСКОВ НА УРОВНЕ ИМПЛАНТАТА		
Ортопедические компоненты /X с конусным соединением между имплантатом и абатментом и направляющим шестигранником		

Снятие оттисков /X	23
Regular /X*	Коронки и мостовидные протезы, широкие абатменты 24
Balance Anterior /X	анатомические абатменты, передний отдел зубного ряда 26
TitaniumBase /X	Титановое основание для индивидуальных керамических абатментов 27

СНЯТИЕ ОТТИСКОВ НА УРОВНЕ ИМПЛАНТАТА		
Ортопедические компоненты C/ с конусным соединением между имплантатом и абатментом		

Снятие оттисков C/	29
Regular C/*	Коронки и мостовидные протезы, широкие абатменты 30
Balance Posterior C/	Коронки и мостовидные протезы, узкие абатменты 32
Balance Anterior C/	Анатомические абатменты, передний отдел зубного ряда 34
TitaniumBase C/	Титановое основание для индивидуальных керамических абатментов 34
Balance Base C/*	Мостовидные протезы с винтовой фиксацией, балки 36
SynCone® C/*	Беззубые челюсти, заготовки для коронок с конусным соединением 38
Snap Attachment C/*	Беззубые челюсти, заготовки ретенционных элементов 40
LOCATOR® C/	Беззубые челюсти, заготовки ретенционных элементов 41

СНЯТИЕ ОТТИСКОВ НА УРОВНЕ АБАТМЕНТА	
Standard C/	Коронки и мостовидные протезы на уровне абатментов 42
Standard C/	Лабораторные компоненты 44

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	50
---------------------------	----

МАТЕРИАЛЫ	51
-----------	----


* Коронки и мостовидные протезы, широкие абатменты

ANKYLOS®

Информация о материалах, из которых изготовлены имплантаты, компоненты системы и инструменты приведена в форме ссылки у каждого наименования: Формирователь десны ANKYLOS® Regular C/ X4. На странице 51 представлена обзорная таблица использованных материалов и их химический состав. Изображения в данном каталоге представлены для иллюстрации. Размер изделий на изображениях может отличаться от истинного. Компания DENTSPLY Friadent оставляет за собой право производить технические изменения без предварительного предупреждения.



ANKYLOS® Имплантаты

Имплантаты ANKYLOS CX® поставляются в двойном стерильном блистере, помещенном в картонную коробку. Такой тип упаковки обеспечивает сохранность и безопасность изделия в соответствии со строгими требованиями, предъявляемыми к медицинской продукции. Кроме того, такая упаковка облегчает хранение, обеспечивает быстрый выбор нужного имплантата и упрощает извлечение имплантата во время хирургической процедуры.

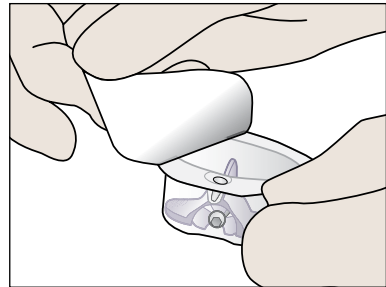

Прозрачный внутренний блистер

- Внутренняя стерильная упаковка
- Содержит контейнер с имплантатом и винт-заглушку
- Отрывной ярлык с серийным номером для документирования лечения

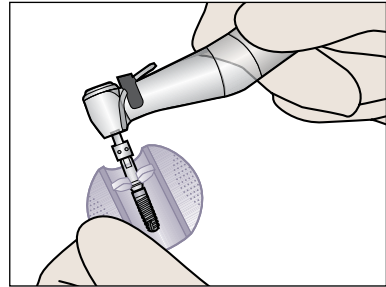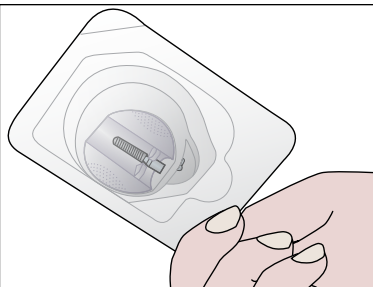

Пластиковый контейнер с имплантатом

- Надежно удерживает имплантат в упаковке и защищает его от повреждения
- Гарантирует бесконтактное извлечение имплантата и его установку в наконечник во время операции
- Три «крыла» с шероховатой поверхностью, исключают выскальзывание контейнера из рук

Винт-заглушка ANKYLOS® (запасная)

Мембранный винт ANKYLOS®

Масштаб 1,5:1



Ø 3,5 мм

Ø 6,0 мм

Ø 6,0 мм для синус-лифтинга, расстояние 1 мм

Ø 6,0 мм для синус-лифтинга, расстояние 2 мм

№ продукта

3101 0480

3101 0110

3101 0120

3101 0130

3101 0140

Масштаб 1,5:1



Для имплантатов

■ A6,6

■ A8

■ A9,5

■ A11

■ A14

■ A17

Ø

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

Длина

6,6 мм

8 мм

9,5 мм

11 мм

14 мм

17 мм

№ продукта

3101 0403

3101 0405

3101 0408

3101 0410

3101 0420

3101 0422

Масштаб 1,5:1



Для имплантатов

■ B6,6

■ B8

■ B9,5

■ B11

■ B14

■ B17

Ø

4,5 мм

4,5 мм

4,5 мм

4,5 мм

4,5 мм

4,5 мм

Длина

6,6 мм

8 мм

9,5 мм

11 мм

14 мм

17 мм

№ продукта

3101 0423

3101 0425

3101 0428

3101 0430

3101 0440

3101 0450

Масштаб 1,5:1



Для имплантатов

■ C8

■ C9,5

■ C11

■ C14

■ C17

Ø

5,5 мм

5,5 мм

5,5 мм

5,5 мм

5,5 мм

5,5 мм

Длина

8 мм

9,5 мм

11 мм

14 мм

17 мм

№ продукта

3101 0453

3101 0455

3101 0458

3101 0460

3101 0470

Масштаб 1,5:1



Для имплантатов

■ D8

■ D9,5

■ D11

■ D14

Ø

7 мм

7 мм

7 мм

7 мм

Длина

8 мм

9,5 мм

11 мм

14 мм

№ продукта

3101 0472

3101 0474

3101 0476

3101 0478

Показания

- Одиночные реставрации
- Мостовидные протезы
- Стабилизация полных съемных протезов

Тип заживления


- Подслизистое или трансгингивальное с применением формирователей десны

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка имплантата:
Имплантовод ANKYLOS®

Вывинчивание установочной
головки, установка винта-заглушки:
Отвертка-шестигранник,
диаметр 1 мм

Установка имплантатов
и вывинчивание установочной
головки без замены инструмента:
Имплантовод ANKYLOS® C/X
с отверткой

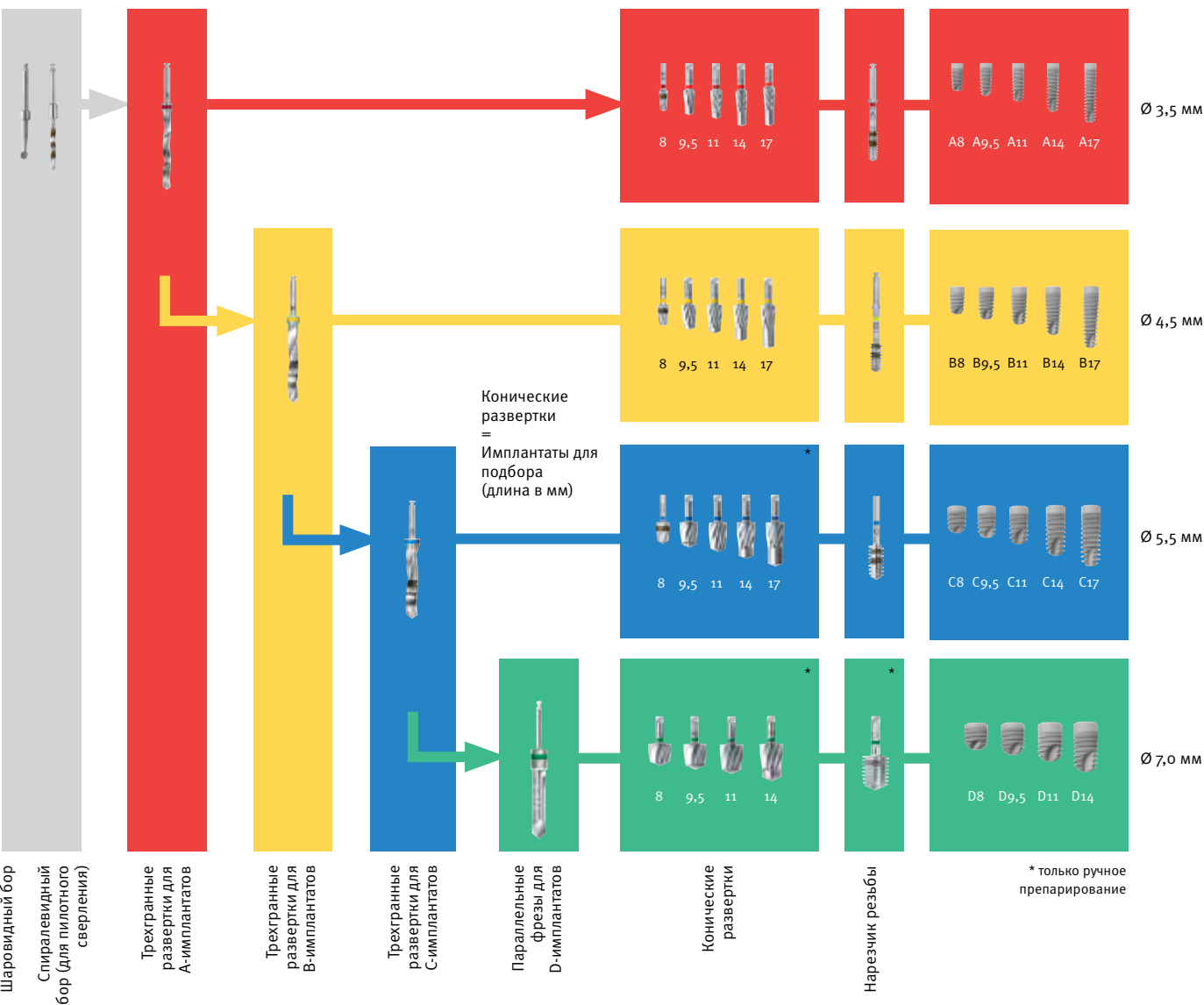

Шаровидный бор
Спиралевидный бор (для пилотного сверления)

Трегранные
развертки для
А-имплантов

Трегранные
развертки для
В-имплантов

Трегранные
развертки для
С-имплантов

Параллельные
фрезы для
D-имплантов

Конические
развертки

Нарезчик резьбы

Конические
развертки

Нарезчик резьбы

* только ручное
препарирование

Шаровидный бор*

Фреза Линдемана*

Спиралевидный бор*

Направляющие для фрезы Линдемана

Переходник-удлинитель**

Масштаб 1:1



Ø 3 мм

l = 8 мм

l = 11 мм

Ø 2 мм

Маркировка колец

№ продукта

3103 3010

3103 3015

3103 3020

3103 3022

3103 3025

3103 3026

91-0003

* С внутренним охлаждением

** Переходник-удлинитель следует всегда использовать с длинной трубкой для внутреннего охлаждения (№ продукта 90-5043).

Трегранные развертки® ANKYLOS®

Масштаб 1:1

17 мм
14 мм
11 мм
9,5 мм
8 мм



Длина
Для имплантов

XS
A

S
A

M
A

L
A

№ продукта

3103 7324

3103 7325

3103 7330

3103 7340

Масштаб 1:1

17 мм
14 мм
11 мм
9,5 мм
8 мм



Длина
Для имплантов

XS
B

S
B

M
B

L
B

№ продукта

3103 7344

3103 7345

3103 7350

3103 7360

Масштаб 1:1

17 мм
14 мм
11 мм
9,5 мм
8 мм



Длина
Для имплантов

XS
C

S
C

M
C

L
C

№ продукта

3103 7364

3103 7365

3103 7370

3103 7380

Параллельные фрезы® ANKYLOS®

Масштаб 1:1

17 мм
14 мм
11 мм
9,5 мм
8 мм



Длина
Для имплантов

XS
D

S
D

M
D

№ продукта

3103 3181

3103 3182

3103 3183

Трегранные развертки® ANKYLOS®

- Для подготовки ложа под имплантат определенного диаметра
- С внутренним охлаждением

Трегранные развертки ANKYLOS® доступны в четырех размерах:
XS – для имплантов с максимальной длиной 8 мм
S – для имплантов с максимальной длиной 14 мм
M – для всех длин имплантов
L – для всех длин имплантов

Все режущие инструменты подлежат замене после 20 циклов использования. Затупившиеся или поврежденные инструменты следует заменять немедленно.

Эффективная глубина препарирования является слегка большей, чем указанная длина имплантата.



А 0,4 мм В 0,5 мм С 0,6 мм D 0,8 мм

Диаметр бора (мм)

2,9 3,8 4,7 5,7

Параллельные фрезы® ANKYLOS®

- Для окончательного препарирования ложа под имплантат D-диаметра

ANKYLOS® | Конические развертки / Метчики

Конические развертки ANKYLOS®

- Для расширения костного ложа в соответствии с конической формой имплантата
- Для каждого имплантата своя развертка
- Используются с угловым наконечником (машинные, только для А и В-имплантатов) или ключом-трещоткой (ручные)
- Используются с угловым наконечником (машинные, только для А и В-имплантатов) или ключом-трещоткой (ручные)

Конические развертки ANKYLOS®

Масштаб 1:1

Для имплантатов

■ A8	■ A9,5	■ A11	■ A14	■ A17	
№ продукта, ручные	3103 3185	3103 3188	3103 3190	3103 3200	3103 3202
№ продукта, машинные	3103 7185	3103 7188	3103 7190	3103 7200	3103 7202

Масштаб 1:1

Для имплантатов

■ B8	■ B9,5	■ B11	■ B14	■ B17	
№ продукта, ручные	3103 3205	3103 3208	3103 3210	3103 3220	3103 3230
№ продукта, машинные	3103 7205	3103 7208	3103 7210	3103 7220	3103 7230

Масштаб 1:1

Для имплантатов

■ C8	■ C9,5	■ C11	■ C14	■ C17	
№ продукта, ручные	3103 3233	3103 3235	3103 3238	3103 3240	3103 3250

Масштаб 1:1

Для имплантатов

■ D8	■ D9,5	■ D11	■ D14	
№ продукта, ручные	3103 3252	3103 3254	3103 3256	3103 3258

Метчик ANKYLOS®

- Для нарезания резьбы под имплантат ANKYLOS®
- Каждый метчик соответствует определенному диаметру имплантата
- Калибровка длины с помощью кольцевых меток или штриховки
- Используются с угловым наконечником (машинные, только для А и В-имплантатов) или ключом-трещоткой (ручные)

Метчик ANKYLOS®

Масштаб 1:1

Для имплантатов

■ A	■ B	■ C	■ D	
№ продукта, ручные	3103 3260	3103 3270	3103 3280	3103 3285
№ продукта, машинные	3103 7440	3103 7450		

ANKYLOS® | Ключ-трещотка / насадка для ключа-трещотки



№ продукта	3103 7500	3103 3031	3103 7502
------------	-----------	-----------	-----------

Насадки для ключа-трещотки ANKYLOS® для машинных инструментов для конических разверток и метчиков

Насадки для ключа-трещотки ANKYLOS® для ручных инструментов для конических разверток и метчиков

короткая, HXSS

средняя, HXSS

длинная, HXSS

короткая

средняя

длинная

Масштаб 1:1

№ продукта

3103 7510	3103 7511	3103 7512	3103 3070	3103 3080	3103 3090
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Имплантовод ANKYLOS® для имплантатов C/X для ручной установки

Имплантовод ANKYLOS® C/X с отверткой для ручной установки

Масштаб 1:1

короткая

средняя

длинная

короткая

средняя

длинная

№ продукта

3103 7531	3103 7532	3103 7533	3103 7551	3103 7552	3103 7553
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Круглый ключ ANKYLOS®

Имплантовод для установки имплантатов ANKYLOS® C/X

Ручка для инструментов, экстра-длинная

Ручка для инструментов, XL

Масштаб 1:1

длинная, HXSS машинная

длинная, HXSS машинная

Уменьшенный масштаб

№ продукта

3103 3040	3103 7541	3103 7543	3103 7539	3103 3095
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ключ-трещотка с индикатором момента вращения

- Для большей безопасности во время ручной установки имплантатов
- Индикатор момента вращения
- Регулировка направления вращения (вправо/влево)

Насадки ANKYLOS® для ключа-трещотки

- Для использования машинных инструментов, имеющих шестигранник для крепления (HXSS), в ключе-трещотке

Насадки для ключа-трещотки ANKYLOS®

- Для использования ручных инструментов в ключе-трещотке

Имплантоводы ANKYLOS®

- Для установки имплантатов ANKYLOS® C/X
- Для использования с угловым наконечником (HXSS) или ключом-трещоткой

Имплантовод ANKYLOS® C/X с отверткой

- Установка имплантата и вывинчивание установочной головки без использования дополнительных инструментов

Круглый ключ ANKYLOS®

- Применяется для держания насадок вместо ключа-трещотки

ANKYLOS® | Фрезы для навигационной хирургии

Пробойник для слизистой ANKYLOS® GS
■ для минимально инвазивной перфорации мягких тканей

Торцевой бор (пилотная фреза) ANKYLOS® GS
■ Для удаления мягких тканей и кости над плечом имплантата после перфорации десны
■ Для выравнивания кости в запланированной позиции имплантата (в зависимости от диаметра имплантата)

Спиралевидные боры и трехгранные развертки ANKYLOS® GS
■ Фрезы, длина которых соответствует длинам имплантатов, используются для препарирования костного ложа до необходимого диаметра
■ Направление фрез в хирургических шаблонах контролируется втулками для фрез (методика Sleeve-on-Drill™)

Втулки ANKYLOS® для спиралевидных боров и трехгранных разверток
■ Для безопасной контролируемой работы фрезами в хирургическом шаблоне (методика Sleeve-on-Drill™)

Sleeve-on-Drill™ втулки после использования необходимо заменить. Они предназначены для одноразового использования.

ИНСТРУМЕНТЫ
Для установки втулок ANKYLOS® на фрезах и имплантоводах инструменты не требуются.

Обратите внимание:
Инструменты с маркировкой "GS", предназначены только для навигационной хирургии с системой ExpertEase™.

Пробойник для слизистой ANKYLOS® GS

Торцевой бор (пилотная фреза) ANKYLOS® GS

Спиралевидный бор ANKYLOS® GS, Ø 2 мм

Масштаб 1:1

■ A- ■ B- ■ A- ■ B- ■ 8 ■ 9,5 ■ 11 ■ 14
имплантаты имплантаты имплантаты имплантаты

№ продукта	3103 7610	3103 7612	3103 7602	3103 7604	3103 7621	3103 7622	3103 7623	3103 7624
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Боры-формирователи канала ANKYLOS® GS

Масштаб 1:1

■ A 8 ■ A 9,5 ■ A 11 ■ A 14 ■ B 8 ■ B 9,5 ■ B 11 ■ B 14

№ продукта	3103 7631	3103 7632	3103 7633	3103 7634	3103 7641	3103 7642	3103 7643	3103 7644
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Втулки для боров ANKYLOS® GS

Втулки ANKYLOS® для спиралевидных боров GS

Набор узких втулок GS Набор широких втулок GS Узкие втулки для спиралевидных боров GS (10 штук) Широкие втулки для спиралевидных боров GS (10 штук) Узкие втулки для трехгранных разверток GS A (10 штук) Широкие втулки для трехгранных разверток GS A (10 штук) Широкие втулки для трехгранных разверток GS B (10 штук)

Длина имплантата ■ A- ■ B- имплантаты имплантаты

№ продукта	3103 7727	3103 7728	3103 7701	3103 7725	3103 7702	3103 7723	3103 7703
	В набор входят: по 1 шт. 3103 7701 3103 7702	В набор входят: по 1 шт. 3103 7725 3103 7723 3103 7703					

Конические развертки ANKYLOS® GS

Масштаб 1:1

■ для имплантатов A8 / A9,5 ■ для имплантатов A11 / A14 ■ для имплантатов B8 / B9,5 ■ для имплантатов B11 / B14

№ продукта	3103 7651	3103 7653	3103 7661	3103 7663
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Нарезчик резьбы (метчик) ANKYLOS® GS

Масштаб 1:1

■ A 8 ■ A 9,5 ■ A 11 ■ A 14 ■ B 8 ■ B 9,5 ■ B 11 ■ B 14

№ продукта	3103 7671	3103 7672	3103 7673	3103 7674	3103 7681	3103 7682	3103 7683	3103 7684
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Имплантовод ANKYLOS® GS

Втулки для имплантовода ANKYLOS® GS (запасная)

Головка прямая для стабилизации ANKYLOS® GS

Масштаб 1:1

короткий, узкий длинный, узкий короткий, широкий длинный, широкий ■ Для A-импл. ■ Для B-импл. ■ Для A-импл. ■ Для B-импл.

№ продукта	3103 7690	3103 7692	3103 7691	3103 7693	3103 7706	3103 7726	3103 7721	3103 7722
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® позиционер

Масштаб 1:1

■ для имплантатов A ■ для имплантатов B

№ продукта	3104 5801	3104 5802
------------	-----------	-----------

Коническая развертка ANKYLOS® GS
■ Для расширения костного ложа и придания ему конической формы, соответствующей форме имплантата
■ Одна развертка подходит для двух длин имплантатов

Нарезчик резьбы (метчик) ANKYLOS® GS
■ Для нарезания первичной резьбы для имплантатов ANKYLOS® C/X
■ Один метчик для имплантата определенного диаметра и длины

Обратите внимание:
Все режущие инструменты подлежат замене после 20 циклов использования. Затулившиеся или поврежденные инструменты следует заменять немедленно!


Имплантовод ANKYLOS® GS
■ Имеет два варианта длины и диаметра: узкий – для A-имплантатов и широкий – для B-имплантатов

Головка прямая для стабилизации ANKYLOS® GS
■ Для предотвращения боковых смещений и ротации хирургического шаблона ExpertEase™ во время препарирования (особенно при множественной имплантации)

ANKYLOS® Хирургические инструменты:
Набор для синус-лифтинга

Набор инструментов ANKYLOS® для синус-лифтинга, в комплекте
■ Набор инструментов для открытого синус-лифтинга
■ Использовать только при наличии соответствующей хирургической подготовки

Набор инструментов ANKYLOS® для синус-лифтинга в комплекте

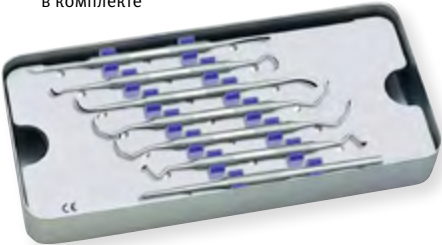

№ продукта	3103 6350
------------	-----------

Элеваторы для синус-лифтинга

Элеватор 01

Элеватор 02

Элеватор 03

Элеватор для мембраны маленький

Уменьшенный масштаб



№ продукта	3103 4510	3103 4520	3103 4530	3103 4540
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Элеватор для мембраны большой

Элеватор для мембраны маленький, с двойным изгибом

Стоматологическое долото

Хирургический молоток для синус-лифтинга

Уменьшенный масштаб



№ продукта	3103 4550	3103 4560	3103 4570	3103 4580
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Хирургические инструменты:
экспандеры для кости

Экспандеры кости ANKYLOS®

Размер 01

Размер 02

Размер 03

Размер 04


Уменьшенный масштаб



№ продукта	3103 4310	3103 4320	3103 4330	3103 4340
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Экспандеры кости ANKYLOS®
■ Для расширения альвеолярного гребня путем расщепления и отделения небной пластинки от вестибулярной
■ D-образное поперечное сечение рабочей части

Набор экспандеров ANKYLOS® в комплекте

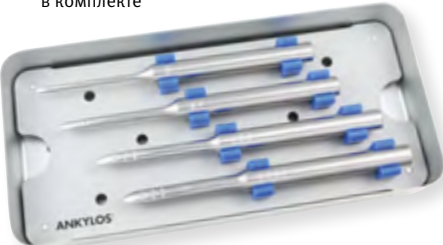

№ продукта	3103 6300
------------	-----------

Позиционный маркер

Пилотный конденсор

Конденсор для А-имплантатов

Конденсор для В-имплантатов

Конденсор для С-имплантатов

Уменьшенный масштаб



№ продукта прямые	3103 4350	3103 4360	3103 4370	3103 4380	3103 4390
№ продукта штыковидные	3103 4352	3103 4362	3103 4372	3103 4382	3103 4392


Конденсоры кости ANKYLOS®
■ Для подготовки костного ложа в мягкой кости
■ Используются для закрытого синус-лифтинга
■ Круглое поперечное сечение рабочей части

Набор костных конденсоров ANKYLOS® в комплекте

№ продукта	3103 6320
------------	-----------

Набор штыковидных конденсоров ANKYLOS® в комплекте

№ продукта	3103 6325
------------	-----------

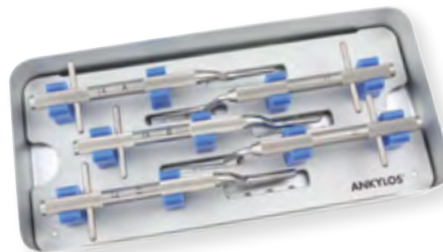

Набор инструментов ANKYLOS® для раскрытия имплантатов



№ продукта	3103 6100
------------	-----------

Отдельные инструменты

Инструмент 1, распатор



Уменьшенный масштаб

Инструмент 2, зонд



Инструмент 3, маленькая кюрета



Инструмент 4, большая кюрета



№ продукта	3103 4110	3103 4120	3103 4130	3103 4140
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Инструмент ANKYLOS® для удаления винтов-заглушек



	короткий	длинный
№ продукта	3103 3434	3103 3435

Ручной круглый ключ ANKYLOS® для отверток



	Стандарт Ø 7 мм	Стандарт Ø 12 мм
№ продукта	3103 3410	3103 3415

Инструмент ANKYLOS® для удаления винтов-заглушек

- устанавливается в ручной круглый ключ
- самонарезающее острие инструмента при вращении против часовой стрелки позволяет безопасно удалить винт-заглушку из имплантата

Пробойник для слизистой ATP



№ продукта	3103 4090
------------	-----------

Втулка для пробойника ATP



№ продукта	3103 4091
------------	-----------

Пробойник для слизистой ATP

- Используется для трепанации мягких тканей с помощью вращающейся втулки и для одновременной маркировки альвеолярного гребня

Физиодиспенсер FRIOS® Unit S/i
Включает: FRIOS® Unit S/i с хирургическим микро мотором (длина кабеля 1,8 м), штангу, подставку для наконечника, ножную педаль, кабель питания, шланги, защиту для стерилизации, набор фиксаторов шлангов (5 штук), блокиратор для микро мотора



№ продукта	90 – 6600
------------	-----------

Физиодиспенсер FRIOS® Unit S/i

- Простая оперативная концепция, разработанная специально для имплантологической хирургии
- Мощный, бесшумный микро мотор
- Ориентированная на пользователя последовательность программ, функция нарезания резьбы, которая активируется одним нажатием кнопки

Более подробную информацию об аксессуарах к физиодиспенсерам FRIOS® S/i, всех наконечниках FRIOS®, а также другой продукции FRIOS® вы можете найти в каталоге FRIOS®.



Информация о втулках Sleeve-on-Drill™, необходимых для препарирования ложа имплантата через хирургический шаблон, представлена на странице 11.

Хирургические наборы ANKYLOS®

№ продукта	Описание
3103 6521	Хирургический набор ANKYLOS® ■ ■ для машинной установки АВ имплантатов Все инструменты, необходимые для установки ANKYLOS® C/X A- и B- имплантатов
3103 6511	Хирургический набор ANKYLOS® ■ ■ для ручной установки АВ имплантатов Все инструменты, необходимые для установки ANKYLOS® C/X A- и B- имплантатов
3103 6501	Хирургический набор ANKYLOS® ■ ■ ■ для ручной установки ABC имплантатов Все инструменты, необходимые для установки ANKYLOS® C/X A-, B- и C-имплантатов
3103 6530	Хирургический набор ANKYLOS® GS ExpertEase™ (Навигационная хирургия) ■ ■ для машинной установки АВ имплантатов Дополнительные инструменты, необходимые для установки ANKYLOS® C/X A- и B-имплантатов длиной L 8 – L 14 по хирургическому шаблону
Модуль для фрез ANKYLOS®	
3103 6573	■ машинные A
3103 6574	■ машинные B
3103 6561	■ ручные A
3103 6562	■ ручные B
3103 6563	■ ручные C
3103 6564	■ ручные D
3103 6583	GS 2.0 (Навигационная хирургия)
3103 6584	■ GS A (Навигационная хирургия)
3103 6585	■ GS B (Навигационная хирургия)
3103 6582	Модуль для инструментов ANKYLOS® GS (Навигационная хирургия)
3103 6580	Модуль-лоток ANKYLOS®
Лоток хирургического набора ANKYLOS® (пустой)	
3103 6542	■ ■ машинные АВ
3103 6540	■ ■ ■ ручные ABC
3103 6531	■ ■ ExpertEase™

Навигационная хирургия с системой ExpertEase™



Инструменты ANKYLOS® для навигационной хирургии с системой ExpertEase™ представлены на стр. 10/11 данного каталога.

Цифровая технология планирования лечения, основанная на 3D визуализации, позволяет точно спланировать лечебные процедуры и сделать результаты лечения предсказуемыми. Система ExpertEase™ от DENTSPLY Friadent является комплексным решением для цифрового планирования и компьютерной навигации, разработанным на базе программного обеспечения Simplant® от компании Materialise, которая заслужила признание специалистов по всему миру.

- Компоненты системы ExpertEase™:
- Программное обеспечение ExpertEase™
 - Шаблоны ExpertEase™
 - Инструменты ExpertEase™

ANKYLOS® Хирургический набор

Новые хирургические наборы – изготовлены в соответствии с вашими требованиями

- Простые, componуемые и экономичные, с модульной системой, содержащей абсолютный минимум необходимых инструментов.
- Возможно добавление дополнительных модулей.
- Инструменты надежно закреплены в силиконовых держателях.
- Наглядная последовательность использования инструментов.
- Легкая стерилизация.



Шаровидный бор ANKYLOS® 3 мм с внутренним охлаждением
№ продукта 3103 3010

Круглый ключ ANKYLOS®
№ продукта 3103 3040

Ручной круглый ключ для отвертки ANKYLOS®
7 мм № продукта 3103 3410
12 мм № продукта 3103 3415

Ключ-трещотка ANKYLOS®
№ продукта 3103 3030

Рожковый ключ ANKYLOS® C/X
№ продукта 3103 7502

Насадка для ключа-трещотки ANKYLOS®
короткая № продукта 3103 3070
средняя № продукта 3103 3080
длинная № продукта 3103 3090

Насадка для ключа-трещотки ANKYLOS® для М-инструментов*
средняя HXSS № продукта 3103 7511 *
длинная HXSS № продукта 3103 7512 *
(и 3 свободных ячейки*)

Модуль для инструментов ANKYLOS®


Модули для фрез ANKYLOS®

Опорный лоток-поднос ANKYLOS®

Спиралевидный бор ANKYLOS® 2 мм с внутренним охлаждением
№ продукта 3103 3022

3 параллельных направляющих ANKYLOS® для спиралевидных боров
№ продукта 3103 3026
Переходник-удлинитель для инструментов ANKYLOS® HXSS*
№ продукта 3103 7408 и 2 свободных гнезда

Имплантовод ANKYLOS® для установки имплантатов C/X
короткая № продукта 3103 7531
средняя № продукта 3103 7532
длинная № продукта 3103 7533
и 2 свободных гнезда

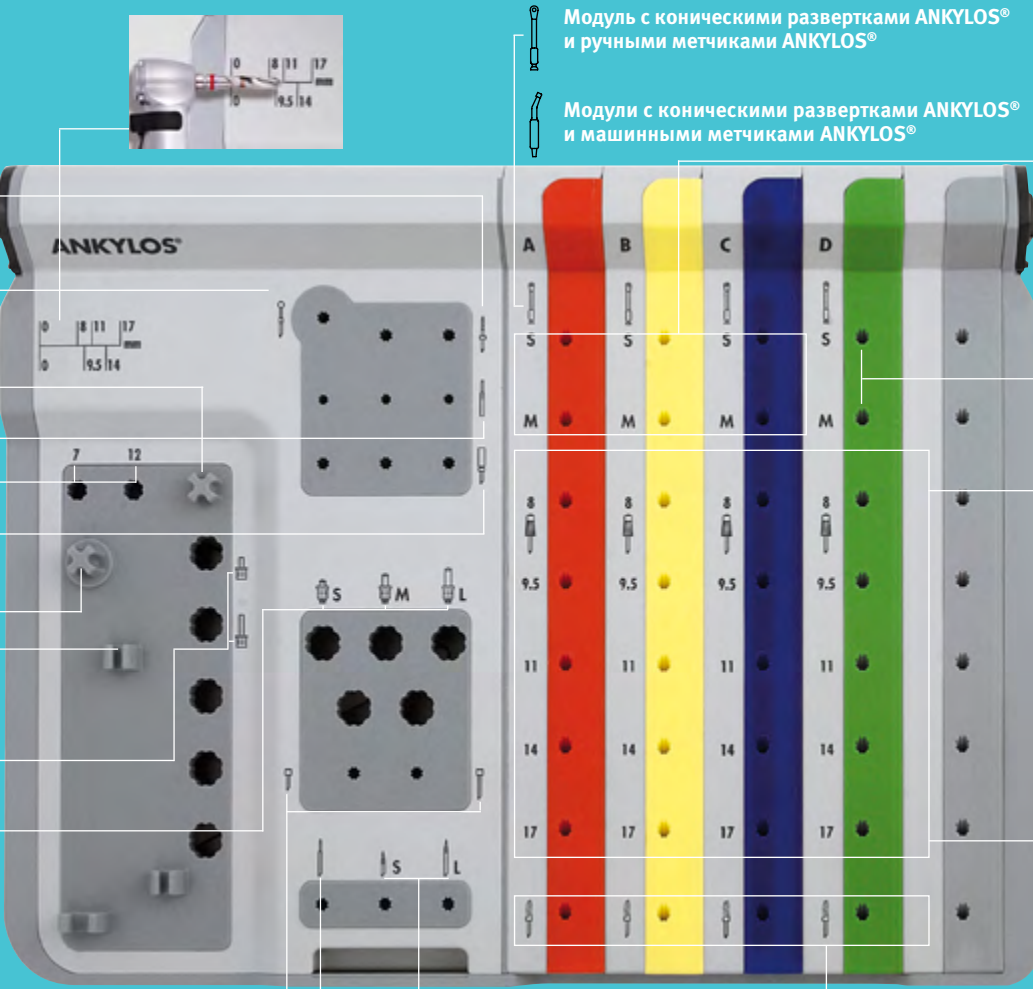

Модуль с коническими развертками ANKYLOS® и ручными метчиками ANKYLOS®

Модули с коническими развертками ANKYLOS® и машинными метчиками ANKYLOS®

Треугольная развертка ANKYLOS®
A / S № продукта 3103 7325
B / S № продукта 3103 7345
C / S № продукта 3103 7365 **
A / M № продукта 3103 7330
B / M № продукта 3103 7350
C / M № продукта 3103 7370 **

Параллельные фрезы ANKYLOS® для D-имплантатов ***
S № продукта 3103 3182 ***
M № продукта 3103 3183 ***

Конические развертки ANKYLOS® ручные
A 8 № продукта 3103 3185
A 9.5 № продукта 3103 3188
A 11 № продукта 3103 3190
A 14 № продукта 3103 3200
A 17 № продукта 3103 3202 ***
B 8 № продукта 3103 3205
B 9.5 № продукта 3103 3208
B 11 № продукта 3103 3210
B 14 № продукта 3103 3220
B 17 № продукта 3103 3230 ***
C 8 № продукта 3103 3233 **
C 9.5 № продукта 3103 3235 **
C 11 № продукта 3103 3238 **
C 14 № продукта 3103 3240 **
C 17 № продукта 3103 3250 ***
D 8 № продукта 3103 3252 ***
D 9.5 № продукта 3103 3254 ***
D 11 № продукта 3103 3256 ***
D 14 № продукта 3103 3258 ***

Конические развертки ANKYLOS® машинные *
A 8 № продукта 3103 7185 *
A 9.5 № продукта 3103 7188 *
A 11 № продукта 3103 7190 *
A 14 № продукта 3103 7200 *
A 17 № продукта 3103 7202 ***
B 8 № продукта 3103 7205 *
B 9.5 № продукта 3103 7208 *
B 11 № продукта 3103 7210 *
B 14 № продукта 3103 7220 *
B 17 № продукта 3103 7230 ***

Имплантовод ANKYLOS® для установки имплантатов C/X (M, HXSS) / короткий *
№ продукта 3103 7541

Имплантовод ANKYLOS® для установки имплантатов C/X (M, HXSS) / длинный *
№ продукта 3103 7543

Отвертка-шестигранник ANKYLOS®, 1 мм
№ продукта 3103 3455

Инструмент ANKYLOS® для удаления винта-заглушки
S № продукта 3103 3434
L № продукта 3103 3435

Ручные метчики ANKYLOS®
A № продукта 3103 3260
B № продукта 3103 3270
C № продукта 3103 3280 **
D № продукта 3103 3285 ***

Машинные метчики ANKYLOS® HXSS
A № продукта 3103 7440 *
B № продукта 3103 7450 *

ANKYLOS® инструмент для очистки фрез (нет изображения)
№ продукта 3103 7320

Все инструменты, не помеченные звездочками, являются частью хирургического набора ANKYLOS® AB инструменты, ручные

* Только в наборе ANKYLOS® AB инструменты, машинные
** Только в наборе ANKYLOS® ABC инструменты, ручные
*** Гнезда для дополнительных инструментов

Хирургический набор ANKYLOS®	Инструментальный модуль	Модули с фрезами A & B	Модули с фрезами C & D	Модуль с фрезами индивидуальный (пустой)	Модуль-лоток
ручные ABC	•	•	•	•	
ручные AB	•	•		•	•
машинные AB	•	•		•	•


Количество гнезд в модулях зависит от типа хирургического набора.

Возможность использования ортопедических компонентов как с направляющим шестигранником, так и без него

■ Компоненты с направляющими шестигранниками для простой и точной установки абатментов в одно из шести возможных положений

■ Компоненты без направляющих шестигранников для свободного позиционирования абатментов

■ Конусное соединение для максимальной протекции мягких тканей, оптимальной стабильности и антиротационным замком

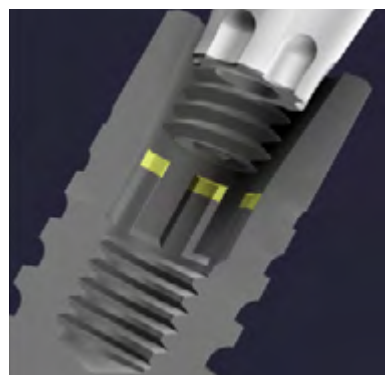

C/




/X



Только ANKYLOS® C/X оставляет Вам возможность выбора: Использовать направляющий шестигранник для упрощения ортопедического протокола или использовать конусное соединение, если этого требует ортопедический протокол, например протокол ANKYLOS® SynCone®.

Обе процедуры дают возможность свободного комбинирования компонентов, поскольку все абатменты подходят для всех имплантатов.

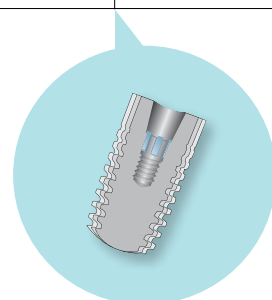

Формирователи десны

Большинство формирователей десны являются цельными и устанавливаются в имплантат при помощи 1 мм отвертки-шестигранника.

Формирователь десны Balance Anterior C/ состоит из двух частей с отдельным винтом, что позволяет индивидуализировать абатмент с последующей его установкой в желаемом положении. Используйте 1 мм отвертку-шестигранник.

Временные абатменты

Временные абатменты изготавливаются из полиэфирэфиркетона (PEEK) упрочненного фианитом и являются двухкомпонентными с отдельным винтом (1 мм шестигранный).

Головки для переноса

Доступны головки для переноса, как методом открытой ложки, так и методом закрытой ложки. Головки для переноса C/ используются для переноса положения имплантата без направляющего шестигранника. Головки для переноса /X используются для переноса, положения имплантата с направляющим шестигранником. Следовательно, они длиннее.

Все головки для переноса имеют сверху 1 мм шестигранный паз, который используется только для их откручивания.

Головки для переноса C/ методом открытой ложки являются двухкомпонентными с отдельным винтом. Головки для переноса C/ методом закрытой ложки являются однокомпонентными.

Головки для переноса /X имеют интегрированный винт для фиксации.

Ортопедические абатменты

Большое количество ортопедических абатментов (например, абатменты Regular) имеют интегрированный винт для фиксации. Этот винт является подвижным, но неизвлекаемым. Абатменты с интегрированным винтом всегда фиксируются в имплантате при помощи 1 мм отвертки-шестигранника.

Однокомпонентные абатменты (например прямой узкий Balance Base) устанавливаются при помощи специальных инструментов, выбор которых зависит от головки абатмента.

Все ортопедические компоненты ANKYLOS® имеют лазерную маркировку, обозначающую специфику их применения:

■ В компонентах с маркировкой "C/" для соединения с имплантатом использовано классическое конусное соединение и отсутствует направляющий шестигранник. Это означает, что абатменты можно установить в любом необходимом положении, при этом благодаря конусному соединению, обеспечивается антиротационный эффект.

■ Компоненты с маркировкой "/X" имеют возможность направленного позиционирования. Направляющий шестигранник позволяет зафиксировать абатмент в одном из шести возможных положений. В этом случае конус также гарантирует оптимальную стабильность и антиротационную защиту.


■ Компоненты с маркировкой "C/X" можно использовать для направленного и ненаправленного позиционирования.



Пожалуйста, обратите внимание:
Для имплантатов ANKYLOS® C/X следует использовать только компоненты с маркировкой "C/X", "C/" или "/X", либо относящиеся к следующим группам: абатменты ANKYLOS® Balance Anterior/ Posterior и репозиционные головки, ANKYLOS® CERCON® Balance, временные абатменты Balance, формирователи десны Balance Anterior и абатменты SynCone®.


ANKYLOS® Ортопедические компоненты /X (с конусным соединением и возможностью направленного позиционирования)

МЕНЕДЖМЕНТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И УСТАНОВКА АБАТМЕНТА

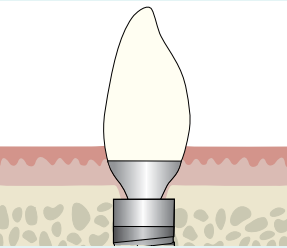


- Благодаря конусному соединению, диаметр абатментов ANKYLOS® на уровне соединения с имплантатом заметно меньше, чем диаметр самого имплантата.
- Поэтому при создании контура мягких тканей и окончательном выборе абатмента необходимо учитывать некоторые особые свойства.

- Мягкие ткани также находятся также и под плечами абатмента.

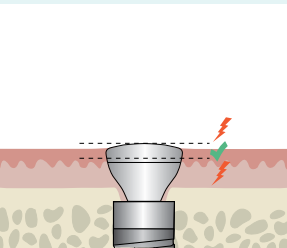


- На рисунке показано правильное использование формирователя десны.
- Если уровень десны находится в области между двумя пунктирными линиями, то это означает, что формирователь десны выбран правильно.
- Если уровень десны находится выше верхней пунктирной линии, то нужно выбрать более высокий формирователь десны; если же он ниже нижней пунктирной линии, то нужно выбрать более низкий формирователь десны.

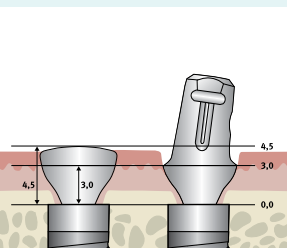


- Формирователь десны и окончательный абатмент необходимо выбирать таким образом, чтобы они соответствовали ортопедическому диапазону и глубине десны.
- Описание высоты формирователя десны (например, GH 3,0) относится только к участку от уровня соединения до края коронки.

всегда примерно на 1,5 мм больше чем номинальная высота (в данном случае, общая высота 4,5 мм). Это нужно для создания формы первой части профиля коронки.

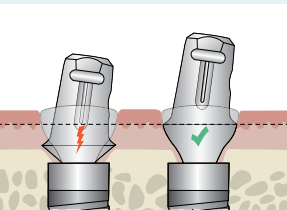

- Общая высота формирователя десны Если сформированное отверстие в мягких тканях меньше, чем профиль используемого абатмента, то это может привести к ненужной компрессии десны. Этот эффект происходит если:
 1. формирователь десны установлен явно выше уровня десны и в дальнейшем используемого абатмента.
 2. формирователь десны соответствует глубине десны, но глубина десны постоянного абатмента меньше, чем у формирователя десны (см. иллюстрацию).
 3. постоянный абатмент имеет больший диаметр, чем выбранный формирователь десны (например, другой ортопедический диапазон)


При переносе конусного соединения с направляющим шестигранником можно установить абатмент в имплантат без ключа переноса.

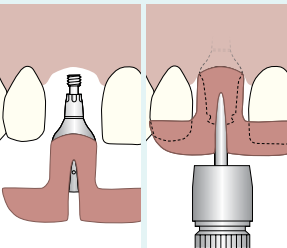

Однако, для большей простоты работы, мы рекомендуем использовать ключ переноса.



Снятие оттисков с направляющим шестигранником

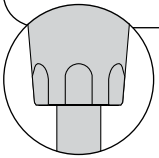

Головка для переноса ANKYLOS® /X
■ Для переноса положения имплантата на рабочую модель техникой открытой ложки

Головка для переноса ANKYLOS® /X (техника открытой ложки) с винтовым удлинением²⁴

Удлинитель винта ANKYLOS® для открытой ложки (5 штук)

Масштаб 1,5:1

	короткая	длинная	
№ продукта	3104 7040	3104 7042	3104 7048

Головка репозиционная ANKYLOS® C/X (техника закрытой ложки)

Масштаб 1,5:1

	короткая	длинная
№ продукта	3104 7044	3104 7046

Головка репозиционная ANKYLOS® Regular C/X (методика закрытой ложки)
■ Для переноса положения имплантата на рабочую модель методикой закрытой ложки

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка всех элементов переноса: Отвертка-шестигранник 1,0 мм

Лабораторный аналог имплантата ANKYLOS® Regular C/X A

Масштаб 1,5:1

№ продукта	3104 7011
------------	-----------

Аналог имплантата лабораторный ANKYLOS® C/X
■ Для фиксации ортопедических компонентов в рабочей модели



МЕНЕДЖМЕНТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И УСТАНОВКА АБАТМЕНТА

Формирователь десны ANKYLOS® Regular C/X
■ Для оптимального формирования окружающих имплантат тканей
■ Выбор формирователя определяется типом десневого края

Формирователь десны ANKYLOS® Regular C/X

Масштаб 1,5:1

GH 0,75	GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5	
№ продукта	3102 4010	3102 4012	3102 4014	3102 4016

Оттисный колпачок 3 в 1 ANKYLOS® Regular C/X
■ Для переноса положения абатмента Regular C/X ANKYLOS® абатмента из полости рта на модель
■ Для изготовления временных реставраций на замковых креплениях (абатмент не обрабатывается)
■ Применяется как моделировочный колпачок для лабораторного аналога имплантата

ПЕРЕНОС НА УРОВНЕ ИМПЛАНТАТА:
Головка репозиционная /X

ПЕРЕНОС НА УРОВНЕ АБАТМЕНТА:
Оттисный колпачок 3 в 1 (для угла наклона 0°-22,5°)

Колпачок 3 в 1 ANKYLOS® Regular C/X

Масштаб 1,5:1


Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5
№ продукта	3104 7120	3104 7121	3104 7122	3104 7123

Аналог абатмента лабораторный ANKYLOS® Regular C/X
■ Для перенесения положения абатмента на модель после снятия оттисков с использованием колпачков 3 в 1

Аналог абатмента лабораторный ANKYLOS® Regular C/X

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5
№ продукта	3104 7110	3104 7111	3104 7112	3104 7113

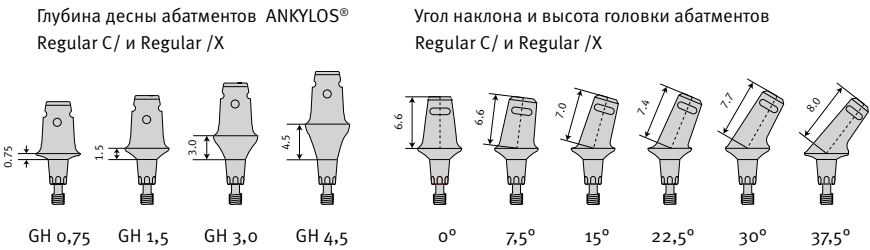

Абатмент ANKYLOS® Regular /X
Глубина десны 0,75

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5	A 30	A 37,5
№ продукта	3102 4110	3102 4111	3102 4112	3102 4113	3102 4114	3102 4115

Глубина десны 1,5

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5	A 30
№ продукта	3102 4120	3102 4121	3102 4122	3102 4123	3102 4124

Глубина десны 3,0

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5
№ продукта	3102 4130	3102 4131	3102 4132	3102 4133

Глубина десны 4,5

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5
№ продукта	3102 4140	3102 4141	3102 4142	3102 4143

Абатмент ANKYLOS® Regular /X
■ Легко адаптируемый к любой клинической ситуации, четыре варианта глубины десны, шесть углов наклона
■ Можно фрезеровать для индивидуализации абатмента
■ Фиксация ортопедической конструкции на цемент или с помощью латерального винта; A 30 и A 37,5 фиксируются окклюзионным винтом
■ для простого и точного позиционирования имеет направляющий шестигранник

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка абатментов ANKYLOS® Regular /X:
Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 15 Н•см

Фиксация ортопедических компонентов с помощью латерального винта (только для A30 и A37,5):
Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 10 Н•см

Латеральный винт ANKYLOS® с внутренним шестигранником М 1,4 ⁴	Переходное кольцо ANKYLOS® для винта М 1,4 ⁴
3105 6301	3105 6304



Формирователь десны ANKYLOS® Balance C/

- Для простого контурирования окружающих мягких тканей
- Выбор формирователя определяется типом десневого края

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка формирователя десны:
Отвертка-шестигранник 1,0 мм

Формирователь десны ⁴ ANKYLOS® Balance C/				Винт для формирователя десны ⁴		
Масштаб 1,5:1						
	Описание	1,5 малый	3,0 малый	1,5 большой	3,0 большой	1,5
№ продукта	3102 1510	3102 1515	3102 1520	3102 1525	3102 1505	3102 1507

ПЕРЕНОС НА УРОВНЕ ИМПЛАНТАТА:
Головка репозиционная /X

Абатмент ANKYLOS® Balance Anterior /X*				
Масштаб 1,5:1				
Описание	малый / 1,5 / прямой Ø 5,5 / Н 6,5	малый / 3,0 / прямой Ø 5,5 / Н 6,5	большой / 1,5 / прямой Ø 7 / Н 7,5	большой / 3,0 / прямой Ø 7 / Н 7,5
№ продукта	3102 2710	3102 2715	3102 2750	3102 2755

Абатмент ANKYLOS® Balance Anterior /X

- Для изготовления высокоэстетичных и функциональных одиночных коронок и мостовидных протезов во фронтальном отделе зубного ряда
- Легко адаптируемый к клиническим условиям: два диаметра, два варианта глубины десны и два угла наклона
- Можно фрезеровать для индивидуализации абатмента
- Фиксация на цемент или с помощью латерального винта
- С направляющим шестигранником или с конусной геометрией соединения

Масштаб 1,5:1				
Описание	малый / 1,5 / 15° Ø 5,5 / Н 6,5	малый / 3,0 / 15° Ø 5,5 / Н 6,5	большой / 1,5 / 15° Ø 7 / Н 7,5	большой / 3,0 / 15° Ø 7 / Н 7,5
№ продукта	3102 2730	3102 2735	3102 2770	3102 2775

ANKYLOS® TitaniumBase ⁴		ANKYLOS® ScanBase ²⁴		
				
Масштаб 1,5:1				
Описание	/ X	/ X высокий	/ X	/ X высокий
№ продукта	3102 2646	3102 2656	3102 2648	3102 2658


ANKYLOS® TitaniumBase

- Для изготовления индивидуальных керамических абатментов
- Титановая основа с заводским соединением абатмент-имплантат, на которую вклеивается индивидуальная керамическая часть


ANKYLOS® ScanBase

- Возможность сканирования геометрии абатмента
- Дизайн, идентичный TitaniumBase, изготовлен из пластика (PEEK), что позволяет использовать аэрозоль и порошок для сканирования
- Возможность использования со всеми распространенными зуботехническими сканерами


Диаметр и высота головки

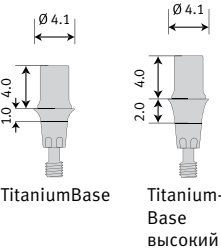


Диаметр и высота головки

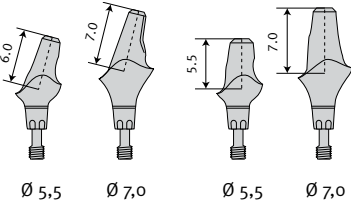

Угол наклона

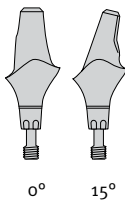

Глубина десны

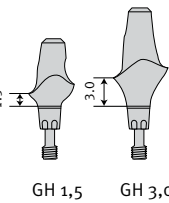

Абатменты от ATLANTIS™ на заказ для ANKYLOS®



ATLANTIS™ CAD/CAM – Абатменты с направляющим шестигранником


Абатменты ATLANTIS™ разработаны специально для получения еще более эстетического результата, благодаря использованию программного обеспечения ATLANTIS VAD™ (для виртуального дизайна абатментов) и изготавливаются с использованием последних достижений в области CAD/CAM. Абатменты ATLANTIS™ изготавливаются из титана, титана золотистого оттенка и циркония.

ANKYLOS®


Ортопедические компоненты C/

(с конусным соединением без возможности направленного позиционирования)


МЕНЕДЖМЕНТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И УСТАНОВКА АБАТМЕНТА

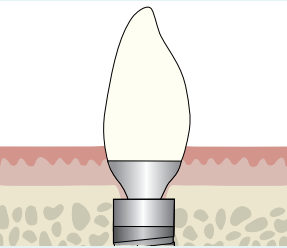


- Благодаря конусному соединению, диаметр абатментов ANKYLOS® на уровне соединения с имплантатом заметно меньше, чем диаметр самого имплантата.
- Мягкие ткани также находятся также и под плечами абатмента.

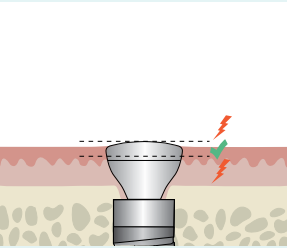


- На рисунке показано правильное использование формирователя десны.
- Если уровень десны находится в области между двумя пунктирными линиями, то это означает, что формирователь десны выбран правильно.

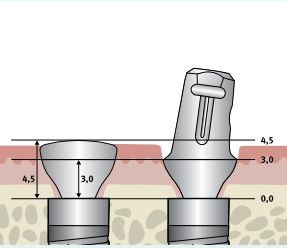

- Формирователь десны и окончательный абатмент необходимо выбирать таким образом, чтобы они соответствовали ортопедическому диапазону и глубине десны.
- Описание высоты формирователя десны (например, GH 3,0) относится только к участку от уровня соединения до края коронки.

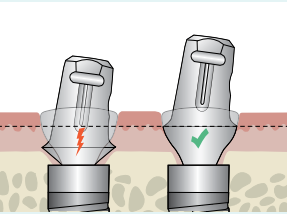

- Общая высота формирователя десны. Если сформированное отверстие в мягких тканях меньше, чем профиль используемого абатмента, то это может привести к ненужной компрессии десны. Этот эффект происходит если:
 1. формирователь десны установлен явно выше уровня десны и в

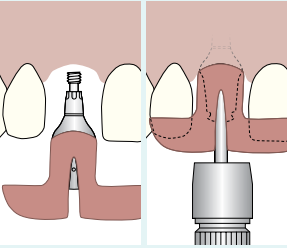

- При переносе конусного соединения без направляющего шестигранника, ключ переноса гарантирует точность установки абатмента в имплантате.

- Поэтому при создании контура мягких тканей и окончательном выборе абатмента необходимо учитывать некоторые особые свойства.


- Если уровень десны находится выше верхней пунктирной линии, то нужно выбрать более высокий формирователь десны; если же он ниже нижней пунктирной линии, то нужно выбрать более низкий формирователь десны.

всегда примерно на 1,5 мм больше чем номинальная высота (в данном случае, общая высота 4,5 мм). Это нужно для создания формы первой части профиля коронки.

- дальнейшем используемого абатмента.
- 2. формирователь десны соответствует глубине десны, но глубина десны постоянного абатмента меньше, чем у формирователя десны (см. иллюстрацию).
- 3. постоянный абатмент имеет больший диаметр, чем выбранный формирователь десны (например, другой ортопедический диапазон)

C/

Снятие оттисков при свободном позиционировании

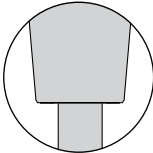

- Головка для переноса ANKYLOS® Balance C/
- Для переноса положения имплантата на рабочую модель при снятии оттисков методом открытой ложки

Головка для переноса⁶ ANKYLOS® Balance C/

Винт для переноса⁶ ANKYLOS® Balance C/

Масштаб 1,5:1



короткая

длинная

короткий

длинный

№ продукта	3104 5410	3104 5412	3104 5400	3104 5402
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Репозиционная головка⁶ ANKYLOS® Balance C/

Репозиционная головка⁶ ANKYLOS® Balance C/ узкая

Масштаб 1,5:1



№ продукта	3104 5415	3104 5416
------------	-----------	-----------

Лабораторный аналог А-имплантата ANKYLOS® Balance C/

Масштаб 1,5:1



№ продукта	3104 5270
------------	-----------

- Репозиционная головка ANKYLOS® Balance C/
- Используется при снятии оттисков методом закрытой ложки

ИНСТРУМЕНТЫ

- Фиксация головок для переноса и репозиционных головок:
- осуществляется вручную, для ослабления натяжения винта, при необходимости, используется отвертка шестигранник 1,0 мм

Формирователь десны ANKYLOS® Regular C/X

- Для оптимального формирования окружающих имплантат тканей
- Выбор формирователя определяется типом десневого края

Формирователь десны* ANKYLOS® Regular C/X

Масштаб 1,5:1

№ продукта	3102 4010	3102 4012	3102 4014	3102 4016

Оттисковый колпачок 3 в 1 ANKYLOS® Regular C/X

- Для переноса положения абатмента Regular C/X ANKYLOS® абатмента из полости рта на модель
- Для изготовления временных реставраций на замковых креплениях (абатмент не обрабатывается)
- Применяется как моделировочный колпачок для лабораторного аналога имплантата

ПЕРЕНОС НА УРОВНЕ ИМПЛАНТАТА:
Головка репозиционная /X

ПЕРЕНОС НА УРОВНЕ АБАТМЕНТА:
Оттисковый колпачок 3 в 1 (для угла наклона 0°-22,5°)

Оттисковой колпачок ANKYLOS® Regular C/X, 3 в 1

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5
№ продукта	3104 7120	3104 7121	3104 7122	3104 7123


Аналог абатмента лабораторный* ANKYLOS® Regular C/X

- Для перенесения положения абатмента на модель после снятия оттисков с использованием колпачков 3 в 1

Аналог абатмента лабораторный* ANKYLOS® Regular C/X

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5
№ продукта	3104 7110	3104 7111	3104 7112	3104 7113

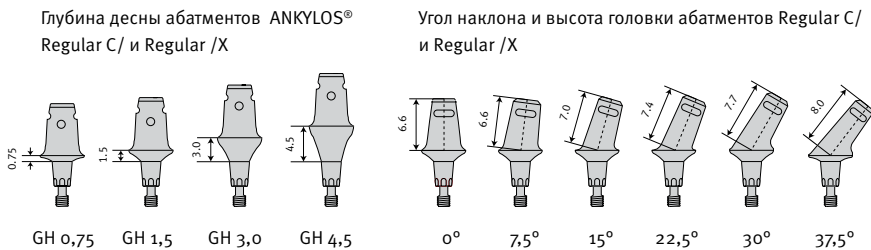

Абатмент* ANKYLOS® Regular C/
Глубина десны 0,75

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5	A 30	A 37,5
№ продукта	3102 4150	3102 4151	3102 4152	3102 4153	3102 4154	3102 4155

Глубина десны 1,5

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5	A 30
№ продукта	3102 4160	3102 4161	3102 4162	3102 4163	3102 4164

Глубина десны 3,0

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5
№ продукта	3102 4170	3102 4171	3102 4172	3102 4173

Глубина десны 4,5

Масштаб 1,5:1

Угол наклона	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5
№ продукта	3102 4180	3102 4181	3102 4182	3102 4183

Абатмент ANKYLOS® Regular C/

- Легко адаптируемый к любой клинической ситуации, четыре варианта глубины десны, шесть углов наклона
- Можно фрезеровать для индивидуализации абатмента
- Фиксация на цемент или с помощью латерального винта; A 30 и A 37,5 фиксируются окклюзионным винтом
- Конусное соединение для установки в любое положение

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка абатментов ANKYLOS® Regular C/:
Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 15 Н•см

Фиксация ортопедических компонентов с помощью латерального винта (только для A30 и A37,5):
Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 10 Н•см

Латеральный винт ANKYLOS® с внутренним шестигранником М 1,4 ⁴	Переходное кольцо ANKYLOS® для винта М 1,4 ¹⁴
3105 6301	3105 6304

Формирователь десны* ANKYLOS® Balance Posterior C/

Масштаб 1,5:1		GH 0,75		GH 1,5		GH 3,0	
№ продукта		3102 1528		3102 1530		3102 1535	
						3102 1540	

ПЕРЕНОС НА УРОВНЕ ИМПЛАНТАТА:
Головка для переноса Balance C/

Глубина десны абатментов ANKYLOS® Posterior C/			
GH 0,75	GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5

Угол наклона и высота головки абатментов Posterior C/						
0°	7,5°	15°	22,5°	30°	37,5°	

Абатмент* ANKYLOS® Balance Posterior C/
Глубина десны 0,75

Масштаб 1,5:1									
Угол наклона		прямой		7,5°		15°		22,5°	
№ продукта		3102 1625		3102 1647		3102 1648		3102 1652	
						3102 1654		3102 1659	

Глубина десны 1,5

Масштаб 1,5:1							
Угол наклона		прямой		7,5°		15°	
№ продукта		3102 1630		3102 1649		3102 1650	
						3102 1653	

Глубина десны 3,0

Масштаб 1,5:1			
Угол наклона		прямой	
№ продукта		3102 1640	
		3102 1660	

Глубина десны 4,5

Масштаб 1,5:1			
Угол наклона		прямой	
№ продукта		3102 1645	
		3102 1665	

Латеральный винт ANKYLOS®
с внутренним шестигранником
М 1 х -0,26

Масштаб 1,5:1	
Угол наклона	
№ продукта	
3102 6051	

- Абатмент ANKYLOS® Balance Posterior C/:**
- Для изготовления коронок и мостовидных протезов в боковых отделах зубного ряда
 - Легко адаптируемый к клиническим условиям: четыре варианта глубины десны, шесть углов наклона
 - Можно фрезеровать для индивидуализации абатмента
 - Фиксация на цемент или с помощью латерального винта
 - Конусное соединение для свободного позиционирования

- ИНСТРУМЕНТЫ**
- Установка абатментов ANKYLOS® Balance C/:**
Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 15 Н•см
- Фиксация ортопедических компонентов с помощью латерального винта:**
Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 10 Н•см

Формирователь десны ANKYLOS® Balance C/

- Для простого контурирования окружающих мягких тканей
- Выбор формирователя определяется типом десневого края

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка формирователя десны:
Отвертка-шестигранник 1,0 мм

Абатмент временный ANKYLOS® Balance C/

- Для изготовления высокоэстетичных временных ортопедических конструкций
- Легко адаптируемый к клиническим условиям: два диаметра, два варианта глубины десны, два угла наклона
- Имеет ретенционную борозду для удержания временного протеза
- Стабильный и рентгеноконтрастный, благодаря диоксиду циркония


Обратите внимание, что максимальный срок службы временных абатментов – 6 месяцев.

ANKYLOS® TitaniumBase

- Для изготовления индивидуальных керамических абатментов
- Титановая основа с заводским соединением абатмент-имплантат, на которую клеивается индивидуальная керамическая часть
- Уплотнение головки с двух сторон для предотвращения проворачивания керамической части
- Конусное соединение с наличием направляющего шестигранника и без него

ANKYLOS® ScanBase

- Возможность сканирования геометрии абатмента
- Дизайн, идентичный TitaniumBase, изготовлен из пластика (PEEK), что позволяет использовать аэрозоль и порошок для сканирования
- Возможность использования со всеми распространенными зуботехническими сканерами

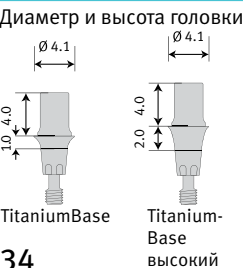

Формирователь десны ANKYLOS® Balance C/ **Винт для формирователя десны⁶**

Масштаб 1,5:1

Описание	1,5 малый	3,0 малый	1,5 большой	3,0 большой	1,5	3,0
№ продукта	3102 1510	3102 1515	3102 1520	3102 1525	3102 1505	3102 1507

ПЕРЕНОС НА УРОВНЕ ИМПЛАНТАТА:
Головка для переноса C/

Абатмент временный^{4/24/32} ANKYLOS® Balance C/

Масштаб 1,5:1

Описание	малый / 1,5/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	малый / 3,0/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	большой / 1,5/ 15° Ø 7 / Н 7,5	большой / 3,0/ 15° Ø 7 / Н 7,5
№ продукта	3102 3311	3102 3316	3102 3351	3102 3356

ANKYLOS® TitaniumBase⁴ **ANKYLOS® ScanBase²⁴**

Масштаб 1,5:1

Описание	малый / 1,5/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	малый / 3,0/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	большой / 1,5/ 15° Ø 7 / Н 7,5	большой / 3,0/ 15° Ø 7 / Н 7,5
№ продукта	3102 3331	3102 3336	3102 3371	3102 3376

ANKYLOS® TitaniumBase⁴ **ANKYLOS® ScanBase²⁴**

Масштаб 1,5:1

Описание	/ C	/ C высокий	/ C	/ C высокий
№ продукта	3102 2642	3102 2652	3102 2644	3102 2654

Абатмент ANKYLOS® Balance Anterior C/

Масштаб 1,5:1

Описание	малый / 1,5/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	малый / 3,0/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	большой / 1,5/ 15° Ø 7 / Н 7,5	большой / 3,0/ 15° Ø 7 / Н 7,5
№ продукта	3102 1550	3102 1560	3102 1570	3102 1580

Абатменты^{32/4} ANKYLOS® CERCON® Balance C/

Масштаб 1,5:1

Описание	малый / 1,5/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	малый / 3,0/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	большой / 1,5/ 15° Ø 7 / Н 7,5	большой / 3,0/ 15° Ø 7 / Н 7,5
№ продукта	3102 1590	3102 1600	3102 1610	3102 1620

Абатменты^{32/4} ANKYLOS® CERCON® Balance C/

Масштаб 1,5:1

Описание	малый / 1,5/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	малый / 3,0/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	большой / 1,5/ 15° Ø 7 / Н 7,5	большой / 3,0/ 15° Ø 7 / Н 7,5
№ продукта	нейтр. 3102 3010 дентин 3102 3310	3102 3015 3102 3315	3102 3050 3102 3350	3102 3055 3102 3355


Абатменты^{32/4} ANKYLOS® CERCON® Balance C/

Масштаб 1,5:1

Описание	малый / 1,5/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	малый / 3,0/ 15° Ø 5,5 / Н 6,5	большой / 1,5/ 15° Ø 7 / Н 7,5	большой / 3,0/ 15° Ø 7 / Н 7,5
№ продукта	нейтр. 3102 3030 дентин 3102 3330	3102 3035 3102 3335	3102 3070 3102 3370	3102 3075 3102 3375

Абатмент ANKYLOS® Balance Anterior C/

- Для изготовления высокоэстетичных и функциональных одиночных коронок и мостовидных протезов во фронтальном отделе зубного ряда
- Легко адаптируемый к клиническим условиям: два диаметра, два варианта глубины десны и два угла наклона
- Можно фрезеровать для индивидуализации абатмента
- Фиксация на цемент или с помощью латерального винта

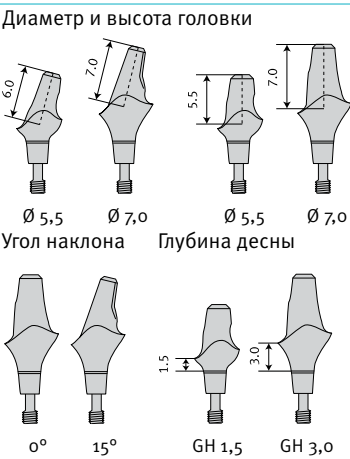

Абатмент ANKYLOS® CERCON® Balance C/

- Для изготовления цельнокерамических коронок, аналогичных естественным зубам, во фронтальном отделе
- Обладает повышенной стабильностью, изготовлен из оксида циркония
- Легко адаптируемый к клиническим условиям: два диаметра, два варианта глубины десны и два угла наклона
- Фрезеровать можно только абатменты больших размеров
- Два оттенка белого: нейтральный и дентин
- Наилучшая эстетика с прекрасными оптическими свойствами
- **Конусное соединение для свободного позиционирования**

Обратите внимание, что показания к применению данного абатмента строго ограничены одиночными коронками во фронтальном отделе зубного ряда.

ANKYLOS® | Абатменты Balance Base, концепция SmartFix™



Надежность в работе
Компоненты абатмента установлены в специальный инструмент, который используется для их установки. Этот короткий и гибкий инструмент позволяет легко устанавливать угловые абатменты Balance Base даже если доступ к месту установки сильно ограничен.

Колпачки для абатментов ANKYLOS® Balance Base C/
■ для простого изготовления реставраций без необходимости замены абатментов в полости рта пациента
■ по причине частичного совпадения резьбы, с колпачками для узких абатментов Balance Base можно использовать только окклюзионные фиксирующие винты 3105 6022/24/25

Защитный колпачок для узкого абатмента ANKYLOS® Balance Base
■ Для контурирования окружающих имплантат тканей при использовании узкого абатмента ANKYLOS® Balance Base C/
■ Для закрытия узкого Base абатмента во рту пациента во время лабораторного этапа

Ретенционный колпачок ANKYLOS® для узкого абатмента Balance Base
■ Для простого переноса на уровне абатмента
■ Используется для снятия оттиска методом открытой ложки с использованием окклюзионного винта 3105 6025

Формирователь десны* ANKYLOS® C/, D 4,2

Масштаб 1,5:1	GH 0,75	GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5
№ продукта	3102 2510	3102 2512	3102 2514	3102 2516



Головка абатмента Balance Base C/ угловая (запасная)

Масштаб 1,5:1	
№ продукта	3102 2570

Лабораторный аналог* абатмента ANKYLOS® Balance Base узкий

Масштаб 1,5:1	
№ продукта	3104 5332

Ретенционный колпачок* ANKYLOS® для узкого абатмента Balance Base

Масштаб 1,5:1	
№ продукта	3105 6216

Защитный колпачок* для абатмента ANKYLOS® Balance Base узкий

Масштаб 1,5:1	
№ продукта	3102 2590

Титановый колпачок* ANKYLOS® для узкого абатмента Balance Base

Масштаб 1,5:1	
№ продукта	3105 6218

Колпачок для абатмента ANKYLOS® Balance Base (из сплава Premador® PDF)¹¹

Масштаб 1,5:1	
№ продукта	3105 6212

Моделировочный колпачок** ANKYLOS® для узкого абатмента Balance Base

Масштаб 1,5:1	
№ продукта	3104 5322

Абатмент* ANKYLOS® Balance Base C/, узкий
Глубина десны 0,75

Масштаб 1,5:1	
Угол наклона	A 0
№ продукта	3102 2520

Глубина десны 1,5

Масштаб 1,5:1	
Угол наклона	A 0
№ продукта	3102 2530

Глубина десны 3,0

Масштаб 1,5:1			
Угол наклона	A 0	A 15	A 30
№ продукта	3102 2540	3102 2542	3102 2546

Глубина десны 4,5

Масштаб 1,5:1			
Угол наклона	A 0	A 15	A 30
№ продукта	3102 2550	3102 2552	3102 2556


Окклюзионный винт ANKYLOS®, M 1,6 мм, с внутренним шестигранником*

Масштаб 1,5:1			
	короткий (анодированный синий)	длинный (на одном уровне с колпачком)	экстрадлинный (удлиняет колпачок на 5 мм)
№ продукта	3105 6022	3105 6024	3105 6025

Абатмент* ANKYLOS® Balance Base C/, узкий
■ Для изготовления балочных конструкций
■ Возможность простого изготовления мостовидных конструкций с винтовой фиксацией
■ Служит основой для балочных и мостовидных конструкций изготовленных по CAD/CAM технологии

Обратите внимание:
■ Абатменты Balance Base необходимо использовать попарно, и их нельзя применять под цементируемые супраструктуры.
■ Противопоказано их применение при изготовлении одиночных коронок.

Диаметр / высота головки / глубина десны

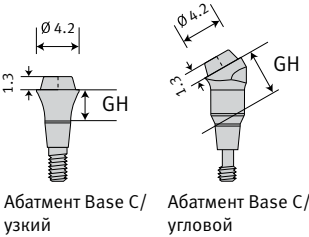

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка абатмента ANKYLOS® Balance Base C/:
Насадка отвертки-шестигранника для ортопедического ключа-трещотки, 1,8 мм, шестигранная, момент вращения 25 Н•см

Установка окклюзионного фиксирующего винта:
Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 10 Н•см

Для обработки ортопедических конструкций в лаборатории существуют специальные финишеры.

Конусность 5°

- унифицированная геометрия головки для нижней и верхней челюсти
- Независимо от количества имплантатов

Дополнительные углы наклона

- 7,5° для более точного выравнивания на нижней челюсти
- 22,5° и 30° специально разработаны для верхней челюсти
- Для большей гибкости в использовании, все углы наклона доступны для любой глубины десны

Параллельные направляющие

- Стандартный позиционирующий ключ можно зафиксировать в ручке для более простого выравнивания абатментов при помощи параллельных направляющих

Конусный колпачок без ретенции

- Колпачок для цементной фиксации на металлический каркас

Винт-заглушка для прямого абатмента

- Применяется для закрытия шахты винта вместо полимера

Формирователь десны* ANKYLOS® C/, D 4,2

Масштаб 1,5:1				
	GH 0,75	GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5
№ продукта	3102 2510	3102 2512	3102 2514	3102 2516









СНЯТИЕ ОТТИСКА:
При немедленной нагрузке оттиск не снимается

ПРИ ДВУХЭТАПНОЙ МЕТОДИКЕ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТОВ ОТТИСК СНИМАЕТСЯ НА УРОВНЕ ИМПЛАНТАТА:

Головка для переноса Balance C/

ПРИ ЗАМЕНЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПОСТОЯННЫЕ ОТТИСК СНИМАЕТСЯ НА УРОВНЕ АБАТМЕНТА:

SynCone® ретенционный конусный колпачок используется как колпачок для переноса

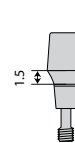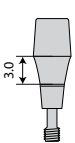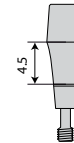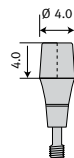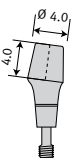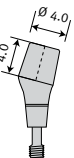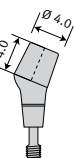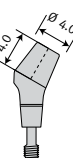Глубина десны			Диаметр, угол наклона и высота головки				
							
GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5	0°	7,5°	15°	22,5°	30°

Абатмент* ANKYLOS® SynCone® C/

Глубина десны 1,5					
Масштаб 1,5:1					
	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5	A 30
№ продукта	3102 2110	3102 2112	3102 2114	3102 2116	3102 2118

Глубина десны 3,0					
Масштаб 1,5:1					
	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5	A 30
№ продукта	3102 2120	3102 2122	3102 2124	3102 2126	3102 2128

Глубина десны 4,5					
Масштаб 1,5:1					
	A 0	A 7,5	A 15	A 22,5	A 30
№ продукта	3102 2130	3102 2132	3102 2134	3102 2136	3102 2138

Винт заглушка для прямой головки SynCone® C/ с конусностью 5°		Конусный колпачок из сплава Degulor® ¹³ для абатмента SynCone® 5°		Гильза ANKYLOS® для бор-шаблона SynCone® ¹⁴ (титановая)
Масштаб 1,5:1				
		с ретенционными элементами	без ретенционных элементов	
№ продукта	3105 6280	3102 2198	3102 2199	3104 5490

Параллельная направляющая* ANKYLOS® для SynCone®		Манжета для полимеризации* ²⁶ SynCone®		Титановый колпачок* ANKYLOS® для SynCone®	
Масштаб 1,5:1					
					
№ продукта	3103 3611	3102 1405		3102 2197	

Абатмент ANKYLOS® SynCone® C/

- Для протезирования нижней челюсти при полной потере зубов с немедленной нагрузкой на протез, опирающийся на четыре имплантата, установленные во фронтальном отделе между подбородочными отверстиями
- для отсроченной нагрузки при протезировании нижней и верхней челюстей
- Прямые и угловые, три варианта глубины десны и пять углов наклона
- Конусное соединение для свободного позиционирования

Также остаются доступными абатменты SynCone® C/ с углом наклона головки 4° и 6°.

Конусный колпачок из сплава Degulor® для головки SynCone® C/

- Для абатментов с конусностью головки 5° созданы колпачки без ретенционных элементов, которые облегчают изготовление протезов на металлическом каркасе при отсроченном протезировании.

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка абатментов ANKYLOS® SynCone® C/:
Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный вращающий момент 15 Н•см

Выравнивание абатментов:
Параллельная направляющая SynCone®

ANKYLOS® Шаровидный замок C/, абатменты с нулевой глубиной десны

Абатмент с шаровидным замком ANKYLOS® C/

- Протезы с опорой на два имплантата на нижнюю челюсть при полной потере зубов
- Изготовление протеза «у кресла» или в лаборатории

Абатмент ANKYLOS® C/4 с шаровидным замком

Масштаб 1,5:1

а / 1,5 а / 3,0 а / 4,5

№ продукта с матрицей	3102 1300	3102 1310	3102 1320
№ продукта без матрицы	3102 1301	3102 1311	3102 1321

Матрица ANKYLOS® для шаровидного замка⁴⁴

Силиконовое кольцо ANKYLOS® (запасное)

Аналог абатмента лабораторный⁶ ANKYLOS® с шаровидным замком

Масштаб 1,5:1

№ продукта	3102 1312	3102 1313	3104 5220
------------	-----------	-----------	-----------

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка шаровидного замка ANKYLOS®:
Насадка для шаровидного замка, рекомендованный момент вращения 25 Н•см

Активация/деактивация матрицы шаровидного замка:
Активатор и деактиватор для шаровидного замка

Протезирование при экстремально тонком типе десны

Компоненты ANKYLOS® с нулевой глубиной десны

- Для протезирования при чрезвычайно тонком типе десны

ANKYLOS® формирователь десны 0,0⁴

Масштаб 1,5:1

■ для А-имплантатов ■ для В-имплантатов ■ для С-имплантатов для формирователя десны 0,0

№ продукта	3102 1451	3102 1452	3102 1454	3102 1431
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Абатмент ANKYLOS® Balance Posterior C/4

Аналог имплантата ANKYLOS® Regular C/X⁶

Масштаб 1,5:1

0,0 / прямой ■ для А-имплантатов ■ для В-имплантатов ■ для С-имплантатов ■ для D-имплантатов

№ продукта	3102 1445	3104 7011	3104 7012	3104 7013	3104 7014
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® LOCATOR®



Абатменты ANKYLOS® LOCATOR® C/4⁴⁰

Масштаб 1,5:1

GH 2 GH 3 GH 4 GH 5 GH 6

№ продукта	3102 2610	3102 2612	3102 2614	3102 2616	3102 2618
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Сменная ретенционная прокладка LOCATOR® (4 шт.)

Масштаб 1,5:1

прозрачная, сильная ретенция розовая, слабая ретенция синяя, очень слабая ретенция серая, нет ретенции расширенный диапазон: зеленая, сильная ретенция расширенный диапазон: оранжевая, слабая ретенция расширенный диапазон: красная, очень слабая ретенция

№ продукта	45 - 3349	45 - 3350	45 - 3351	45 - 3360	45 - 3352	45 - 3353	45 - 3354
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Слепочный колпачок⁴² LOCATOR® (4шт.)

Набор для установки LOCATOR® (по 2 шт.)

Лабораторный аналог⁴⁴ LOCATOR® (4 шт.)

Масштаб 1,5:1

Титан⁴³ Нержавеющая сталь⁴³

№ продукта	45 - 3355	45 - 3347	45 - 3348	45 - 3356
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Удаляемая ретенционная вставка⁴⁶ LOCATOR® (4 шт.)

Изолирующий спейсер⁴⁷ LOCATOR® (20 шт.)

Спейсер для снятия оттиска⁴⁸ LOCATOR® (4 шт.)

Муфта держателя абатмента⁵⁰ LOCATOR® (4 шт.)

Масштаб 1,5:1

№ продукта	45 - 3358	45 - 3359	45 - 3361	45 - 3341
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Инструмент для установки⁴⁹ LOCATOR® 3-х компонентный

Отвертка для ключа-трещотки⁶ ANKYLOS® для LOCATOR®

Шаблон для измерения угла наклона абатмента⁵¹ LOCATOR®

Параллельная направляющая⁵¹ LOCATOR® (4 шт.)

Уменьшенный масштаб

№ продукта	45 - 3340	3103 3635	45 - 3345	45 - 3346
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® LOCATOR®

- Полные съемные протезы на двух имплантатах
- Самоцентрирующий дизайн для удобной фиксации во рту путем защелкивания
- Небольшая общая высота протеза обеспечивает большую свободу в условиях ограниченного пространства
- Гибкость в индивидуальном определении ретенции протеза и компенсации осевых расхождений

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка абатментов LOCATOR®:
Инструмент для установки LOCATOR®, 3-х компонентный или отвертка для ортопедического ключа трещотки ANKYLOS®.

Набор для установки LOCATOR®:

- 2 x Матрица
- 2 x Изолирующий спейсер
- 2 x Сменная ретенционная прокладка прозрачная, сильная ретенция
- 2 x Сменная ретенционная прокладка розовая, слабая ретенция
- 2 x Сменная ретенционная прокладка синяя, очень слабая ретенция

Формирователь десны ANKYLOS® Standard C/

- Для простого контурирования окружающих имплантат тканей
- Выбор формирователей зависит от высоты десны и от планируемого диаметра имплантата а или b

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка формирователя десны:
Отвертка-шестигранник 1,0 мм


Простое и экономичное протезирование одиночных и концевых дефектов зубного ряда одиночными коронками или мостовидными протезами.

Абатменты ANKYLOS® Standard C/ имеют только с конусное соединение C/ без направляющего шестигранника.


Формирователь десны ANKYLOS® Standard C/ compact

Масштаб 1,5:1						
						
Описание	a / 1,5 компакт	a / 3,0 компакт	a / 4,5 компакт	a / 6,0 компакт	b / 1,5 компакт	b / 3,0 компакт
№ продукта	3102 1011	3102 1021	3102 1026	3102 1028	3102 1031	3102 1041


Диаметр

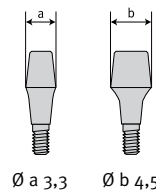

Глубина десны

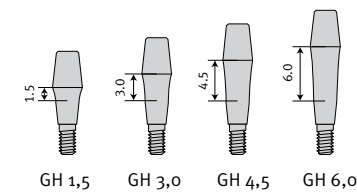

Угол наклона и высота головки

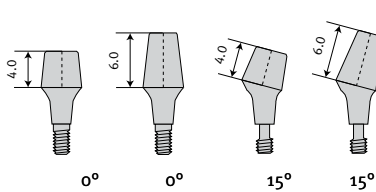

Абатмент ANKYLOS® Standard C/
Прямые абатменты

Прямой, стандартный абатмент устанавливается при помощи фиксационного ключа для "а" и "b" абатментов
Для фиксации супраструктур используется окклюзионный винт М 1,6.

Масштаб 1,5:1						
						
Описание	a / 1,5 / 4,0	a / 1,5 / 6,0	a / 3,0 / 4,0	a / 4,5 / 4,0	a / 6,0 / 4,0	a / 3,0 / 6,0
№ продукта	3102 1050	3102 1060	3102 1070	3102 1076	3102 1078	3102 1080

				
				
Масштаб 1,5:1				
Описание	b / 1,5 / 4,0	b / 1,5 / 6,0	a / 3,0 / 4,0	a / 3,0 / 0,0
№ продукта	3102 1090	3102 1100	3102 1110	3102 1120

Угловые абатменты
15° абатменты Standard устанавливаются в правильном положении при помощи позиционирующего ключа для угловых абатментов и фиксируются стяжным винтом с моментом вращения 1,5 Н•см.
Отвертка-шестигранник 1,0 мм. Супраструктура удерживается латеральным винтом М 1 х 0,2.

				
Масштаб	1,5:1			
Описание	a / 1,5 / 4,0 15°	a / 1,5 / 6,0 15°	a / 3,0 / 4,0 15°	a / 3,0 / 6,0 15°
№ продукта	3102 1130	3102 1140	3102 1150	3102 1160

				
				
Масштаб 1,5:1				
Описание	b / 1,5 / 4,0 15°	b / 1,5 / 6,0 15°	b / 3,0 / 4,0 15°	b / 3,0 / 6,0 15°
№ продукта	3102 1170	3102 1180	3102 1190	3102 1200

- Абатменты ANKYLOS® Standard C/
- Подходят для многих клинических ситуаций благодаря различным размерам и углам наклона
 - Абатмент подбирают «у кресла» и он остаётся в полости рта пациента
 - Упрощённая процедура снятия оттиска и припасовки каркаса протеза
 - Цементная или винтовая фиксация (окклюзионный винт для прямого абатмента, латеральный – для углового)

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка прямого абатмента ANKYLOS® Standard C/:
Фиксационный ключ для а- и b-абатментов, рекомендованный момент вращения 25 Н•см

Установка прямого абатмента ANKYLOS® Standard C/:
Шестигранная отвертка 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 15 Н•см

Фиксация коронок и мостовидных протезов с помощью окклюзионных и латеральных винтов:
Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 10 Н•см

Фиксация балки с помощью винта для балочного колпачка:
Плоская отвертка 1,6 мм, рекомендованный момент вращения 10 Н•см

Ортопедические компоненты Standard C/

C/


Оттисной колпачок ANKYLOS® Standard:

- Для переноса положения абатмента на рабочую модель
- Фиксируется на абатменте благодаря ретенции, на прямых абатментах также фиксируется с помощью длинного винта (техника открытой ложки)

Оттисной колпачок ANKYLOS® Standard²⁷

Масштаб 1,5:1

			
a / 1,5 / 4,0 a / 3,0 / 4,0	a / 1,5 / 6,0 a / 3,0 / 6,0	b / 1,5 / 4,0 b / 3,0 / 4,0	b / 1,5 / 6,0 b / 3,0 / 6,0
№ продукта 3104 5011	3104 5021	3104 5031	3104 5041

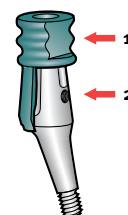

Обратите внимание:

При использовании 15° абатментов плоский участок (1) оттисного колпачка нужно выставить с той же стороны, что и отверстие под латеральный винт (2).

Колпачок для временных протезов ANKYLOS® Standard

Масштаб 1,5:1

			
a / 1,5 / 4,0 a / 3,0 / 4,0	a / 1,5 / 6,0 a / 3,0 / 6,0	b / 1,5 / 4,0 b / 3,0 / 4,0	b / 1,5 / 6,0 b / 3,0 / 6,0
№ продукта 3104 5280	3104 5290	3104 5300	3104 5310

Колпачки для временных протезов ANKYLOS® Standard

- Для легкого и быстрого изготовления временных протезов на прямых и угловых абатментах Standard
- Изготовление временных протезов «у кресла» или в лаборатории

Аналог абатмента лабораторный ANKYLOS® Standard, однокомпонентный

- Для лабораторного изготовления конструкций с опорой на имплантаты по системе Standard
- Для фиксации золотых колпачков в модели для пайки

Аналог абатмента лабораторный ANKYLOS® Standard однокомпонентный

Масштаб 1,5:1


			
a / 1,5 / 4,0 a / 3,0 / 4,0 прямой	a / 1,5 / 6,0 a / 3,0 / 6,0 прямой	b / 1,5 / 4,0 b / 3,0 / 4,0 прямой	b / 1,5 / 6,0 b / 3,0 / 6,0 прямой
№ продукта 3104 5140	3104 5150	3104 5160	3104 5170

Масштаб 1,5:1

			
a / 1,5 / 4,0 a / 3,0 / 4,0 15°	a / 1,5 / 6,0 a / 3,0 / 6,0 15°	b / 1,5 / 4,0 b / 3,0 / 4,0 15°	b / 1,5 / 6,0 b / 3,0 / 6,0 15°
№ продукта 3104 5142	3104 5152	3104 5162	3104 5172

Также доступны двухкомпонентные лабораторные аналоги ANKYLOS® Standard.


Моделировочный колпачок ANKYLOS® Standard прямой и 15°, для одиночных коронок

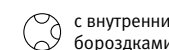

Масштаб 1,5:1

			
a / 1,5 / 4,0 a / 3,0 / 4,0	a / 1,5 / 6,0 a / 3,0 / 6,0	b / 1,5 / 4,0 b / 3,0 / 4,0	b / 1,5 / 6,0 b / 3,0 / 6,0
№ продукта 3104 5180	3104 5190	3104 5200	3104 5210

Моделировочный колпачок ANKYLOS® Standard прямой и 15°, для мостовидных протезов

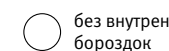

Масштаб 1,5:1

			
a / 1,5 / 4,0 a / 3,0 / 4,0	a / 1,5 / 6,0 a / 3,0 / 6,0	b / 1,5 / 4,0 b / 3,0 / 4,0	b / 1,5 / 6,0 b / 3,0 / 6,0
№ продукта 3104 5182	3104 5192	3104 5202	3104 5212

Балочный колпачок ANKYLOS® Standard из сплава Degunorm^{®12}

Масштаб 1,5:1


			
a / 1,5 / 4,0 a / 3,0 / 4,0	a / 1,5 / 6,0 a / 3,0 / 6,0	b / 1,5 / 4,0 b / 3,0 / 4,0	b / 1,5 / 6,0 b / 3,0 / 6,0
№ продукта 3105 6160	3105 6170	3105 6180	3105 6190

Балочный колпачок ANKYLOS® Standard из сплава Premador^{®14}

Масштаб 1,5:1

			
a / 1,5 / 4,0 a / 3,0 / 4,0	a / 1,5 / 6,0 a / 3,0 / 6,0	b / 1,5 / 4,0 b / 3,0 / 4,0	b / 1,5 / 6,0 b / 3,0 / 6,0
№ продукта 3105 6100	3105 6110	3105 6120	3105 6130

Окклюзионный винт ANKYLOS®, короткий

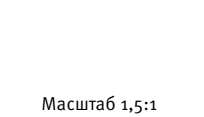

№ продукта 3105 6022

Латеральный винт ANKYLOS®, M1x0,2° с внутренним шестигранником



№ продукта 3105 6051

Переходное кольцо ANKYLOS® со шлицей для колпачков 1,6 мм



№ продукта 3105 6052

Винт балочный ANKYLOS® со шлицей для колпачков 1,6 мм



№ продукта 3105 6140

Моделировочный колпачок ANKYLOS® Standard

- Для моделирования одиночных коронок на прямых и угловых абатментах Standard
- Окклюзионные и латеральные отверстия для фиксации супраструктур винтами
- Антиротационные рёбра
- Также для цементируемых конструкций

Моделировочный колпачок ANKYLOS® Standard для мостовидных протезов

- Для изготовления мостовидных протезов на прямых и угловых абатментах Standard
- Окклюзионные и латеральные отверстия для винтовой фиксации супраструктур
- Также для цементируемых конструкций

Балочные колпачки ANKYLOS® Standard

- Для изготовления балочных конструкций на прямых абатментах Standard
- Для пайки, из драгоценного сплава Degunorm® с большим содержанием золота
- Для литья, из драгоценного сплава Permador®

ИНСТРУМЕНТЫ

Фиксация коронок и мостов с помощью окклюзионных и латеральных винтов:

Отвертка-шестигранник 1,0 мм, рекомендованный момент вращения 10 Н•см

Фиксация балок с помощью винтов для золотых колпачков:

Плоская отвертка 1,6 мм, рекомендованный момент вращения 10 Н•см



Наборы инструментов

№ продукта	Описание
3103 6165	Набор ортопедический мини ANKYLOS®
3103 6120	Набор ортопедический ANKYLOS®
3103 6140	Набор ортопедический ANKYLOS® для системы абатментов Balance
3103 6150	Набор ортопедический ANKYLOS® для системы абатментов Standard



3104 5500	Лабораторный набор примерочных абатмента ANKYLOS® Standard (64 примерочных абатментов)
-----------	--

Одиночные абатменты ANKYLOS®, наборами по 4 шт. (рисунок отсутствует)			
прямой	15°	Описание	цвет
3104 5550	3104 5630	Примерочный абатмент а/1,5/4,0	красный
3104 5560	3104 5640	Примерочный абатмент а/1,5/6,0	желтый
3104 5570	3104 5650	Примерочный абатмент а/3,0/4,0	красный
3104 5580	3104 5660	Примерочный абатмент а/3,0/6,0	желтый
3104 5590	3104 5670	Примерочный абатмент б/1,5/4,0	синий
3104 5600	3104 5680	Примерочный абатмент б/1,5/6,0	зеленый
3104 5610	3104 5690	Примерочный абатмент б/3,0/4,0	синий
3104 5620	3104 5700	Примерочный абатмент б/3,0/6,0	зеленый

3104 5710	Лабораторный набор примерочных абатментов ANKYLOS® Balance Posterior (60 примерочных абатмента)
-----------	---



Содержимое ортопедического набора:	3103 6165 (мини)	3103 6120	3103 6140 (Balance)	3103 6150 (Standard)
Ручка для отвертки, Standard Ø 7 мм		■	■	■
Инструмент для выкручивания заглушки, короткий		■	■	■
Инструмент для выкручивания заглушки, длинный		■	■	■
Насадка – отвёртка плоская, 1,6 мм		■		■
Насадка – отвёртка-шестигранник, 1,0 мм		■	■	■
Насадка – отвёртка плоская, 1,0 мм		■		■
Позиционирующий ключ для угловых абатментов		■		■
Насадка для ключа-трещотки, шестигранная 1,0 мм, 15 Н-см	■	■	■	■
Насадка для ключа-трещотки, шестигранная 1,8 мм, 25 Н-см		■	■	
Насадка для ключа-трещотки, шестигранная 1,0 мм, короткая, 10 Н-см		■	■	■
Насадка для ключа-трещотки для а-абатментов, прямая (Standard), 25 Н-см		■		■
Насадка для ключа-трещотки для б-абатментов, прямая (Standard), 25 Н-см		■		■
Ключ-трещотка	■	■	■	■
Инструмент для монтажа насадок в ключе - трещотке	■	■	■	■

Ортопедические инструменты используются для установки всех супраструктур и их элементов. Ортопедические инструменты, как и хирургические, изготовлены из высококачественного коррозионностойкого материала.

Инструмент для удаления винта-заглушки ANKYLOS®
■ Можно устанавливать в ручку для отвертки
■ Инструмент с самонарезающим острием для безопасного удаления винтов-заглушек

Отвертка-шестигранник⁶ ANKYLOS®, 1 мм

Ключ ручной для отвертки⁶ ANKYLOS®

Масштаб 1:1

Стандарт Ø 7 мм

Стандарт Ø 12 мм

№ продукта	3103 3400	3103 3410	3103 3415
------------	-----------	-----------	-----------

Инструмент для удаления винта-заглушки⁶ ANKYLOS®

Насадка-отвертка⁶ ANKYLOS® 1,6 мм плоская

Масштаб 1:1

короткий

длинный

для винтов со шлицем

№ продукта	3103 3434	3103 3435	3103 3450
------------	-----------	-----------	-----------

Насадка-отвертки⁶ ANKYLOS® 1,0 мм шестигранная

Насадка-отвертки⁶ ANKYLOS® 1,0 мм шестигранная

Насадка-отвертка⁶ ANKYLOS® 1,0 мм плоская

Масштаб 1:1

для шестигранных винтов

короткая

для винтов без головок с цементной фиксацией супраструктур

№ продукта	3103 3455	3103 3456	3103 3460
------------	-----------	-----------	-----------

Активатор шаровидного замка ANKYLOS®

Деактиватор шаровидного замка ANKYLOS®

Ключи⁶ ANKYLOS® для фиксации

Масштаб 1:1

Позиционирующий ключ

для a-Standard абатментов, короткая

для b-Standard абатментов, короткая

Позиционирующий ключ для угловых абатментов Standard

№ продукта	3103 3501	3103 3502	3103 3471	3103 3481	3103 3485
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Вспомогательный инструмент ANKYLOS® для монтажа насадок в ключе-трещотке⁶

Ортопедический ключ-трещотка⁶ ANKYLOS®

Масштаб 1:1

№ продукта	3103 3632	3103 3630
------------	-----------	-----------

Насадка для ключа-трещотки⁶ ANKYLOS®

Масштаб 1:1

для a-абатментов

для b-абатментов

для шаровидных замков

1,0 мм шестигранник

1,0 мм шестигранник, длинная

1,0 мм шестигранник, короткая

1,8 мм шестигранник

для a-абатментов, длинная

для b-абатментов, длинная

для LOCATOR®

№ продукта	3103 3621	3103 3622	3103 3623	3103 3625	3103 3628	3103 3626	3103 3627	3103 3633	3103 3634	3103 3635
Torque Ncm	25	25	25	15	15	10	25	25	25	30

Лабораторная отвертка^{6/Kst} ANKYLOS®
момент вращения 10 Н•см

Финишер⁶ ANKYLOS®

Масштаб 1:1

для абатмента Balance Base

для конусного окклюзионного ретенционного винта

для конусного латерального ретенционного винта

№ продукта	3103 3640	3103 3570	3103 3580	3103 3590
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ручка ANKYLOS® для аналогов абатментов и абатментов^{6/Kst}

Масштаб 1:1

№ продукта	3103 6202
------------	-----------



Демонстрационные модели

№ продукта	Описание
45 – 9981	FRIADENT® пластмассовая модель верхней челюсти без ортопедических конструкций (ANKYLOS®, XiVE®, FRIALIT®)
45 – 9982	FRIADENT® пластмассовая модель верхней челюсти с ортопедическими конструкциями (ANKYLOS®, XiVE®, FRIALIT®)
3109 9200	ANKYLOS® C/X пластмассовая модель верхней челюсти под коронку и мостовидную конструкцию (3 имплантата без ортопедических конструкций)
3109 9240	Пластмассовая модель беззубой нижней челюсти (4 имплантата без ортопедических конструкций)
3109 9262 наклона	ANKYLOS® SynCone® модель для демонстрации изменения угла абатментов (без ортопедических конструкций)
3109 9261	ANKYLOS® SynCone® пластмассовая модель с ортопедическими конструкциями

Компакт-диски для лекторов

№ продукта	Описание
66 – 2507	Компакт диск с графическими материалами ANKYLOS®
66 – 1077	Компакт диск с графическими материалами ExpertEase™
66 – 1078	Компакт диск с графическими материалами CAD/CAM
66 – 1038	Компакт диск с графическими материалами для интернет, для всех систем

Металлы

Тип	Номер	Состав
Титан	2	Ti класс 2, DIN EN ISO 5832-2
Титан	3	Ti класс 4, DIN EN ISO 5832-2
Титан	4	Ti6Al4V
Титан	40	Ti6Al4V класс 5
Алюминий	5	AlMg ₃
Нержавеющая сталь	6	Хирургическая сталь
Нержавеющая сталь	49	316L SS SS/303 SE
Нержавеющая сталь	51	316L SS
Сплав® PDF*	11	Au: 60%, Pt: 39%, Ir: 1%
Сплав Degunorm® **	12	Au: 73,8%, Pt: 9,0%, Ag: 9,2%, Cu: 4,4%, Zn: 2,0%, Ir: 0,1%, In: 1,5%
Сплав Degulor® 3406	13	Au: 65,0%, Ag: 13,0%, Cu: 11,5%, Pt: 8,9%, Pd: 1,0%, Zn: 0,5%, Ir: 0,1%
Сплав Permador®	14	Au: 60,0%, Pt: 24,9%, Pd: 15%, Ir: 0,1%
Полиэтилен/алюминий	42	ПЭНП/6061 T6 Al
Полиамид/полиэтилен/нержавеющая сталь/пластмасса	43	Нейлон/ПЭНП/Ti6Al4V/силиконовый каучук
Полиамид/полиэтилен/нержавеющая сталь/пластмасса	44	Нейлон/ПЭНП/303 SE SS/силиконовый каучук
Алюминий	45	6061 T6 алюминий
Латунь/полиоксиметилен	48	MS-002, ДЕЛРИН, 1/4"
Латунь/полисульфон	50	MS-013-1 ПОЛИСУЛЬФОН (3/8")

* TEC 12.1; ** TEC 16.7

Пластмассы

Тип	Номер	Состав
Полиоксиметилен (POM)	20	
Полиэфирэфиркетон (PEEK)	24	
Силикон	26	
Силикон	47	Силиконовый каучук
Поликарбонат	27	
Полиамид	41	Зайтел 101I нейлон
Полиэтилен/Алюминий	42	ПЭНП/6061 T6 Al
Полиамид/полиэтилен/нержавеющая сталь/пластмасса	43	Нейлон/ПЭНП/Ti6Al4V/ силиконовый каучук
Полиамид/полиэтилен/нержавеющая сталь/пластмасса	44	Нейлон/ПЭНП/303 SE SS/ силиконовый каучук
Полиэтилен	46	НЭНП
Латунь/ полиоксиметилен	48	MS-002, ДЕЛРИН, 1/4"
Латунь / полисульфон	50	MS-013-1 ПОЛИСУЛЬФОН (3/8")

Керамика

Тип	Номер	Состав
Оксид циркония	32	ZrO ₂

Эксклюзивный дистрибьютор
ANKYLOS® в России и Украине:
Группа компаний «Стомус»

Россия

Санкт-Петербург

194291, пр. Луначарского, 49
Тел.: +7 (812) 438 16 73 (74)
Факс.: +7 (812) 559 52 00
e-mail: stomus@stomus.ru

Москва

115093, ул. Павловская, 6
Тел.: +7 (495) 669 78 72
Факс.: +7 (495) 669 78 73
e-mail: stomus-m@yandex.ru
stomus-m@stomus.ru

Новосибирск

630004, ул. Челюскинцев, 14/2
Тел./факс: +7 (383) 201 04 62
+7 (383) 201 09 46
e-mail: stomus-sibir@inbox.ru
stomus-sibir@stomus.ru

Украина

КК

02660, ул. Попудренко, 52
КК/КК +38 (044) 586 59 60 (61)
e-mail: info.kiev@stomus.ru

Производитель:

DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH · P. O. Box 71 01 11 · 68221 Mannheim/Germany
Phone +49 621 4302-000 · Fax +49 621 4302-001 · e-mail: implants-info@dentsply.com

Производитель FRIOS® Handpieces, FRIOS® Unit S/i:
W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH · A-5111 Bürmoos/Austria

Manufacturer ANKYLOS® LOCATOR®:
ZEST ANCHORS, LLC. · 2061 Wineridge Place · Escondido, CA 92029/USA
EU-Repräsentant: Wellkang Ltd. · 29 Harley St. W1G 9QR London/ U.K.

www.dentsplyimplants.com

