# Инструменты ROCKHARD

1112

FINEST DENTAL INSTRUMENTS





No. 1112

FINEST DENTAL INSTRUMENTS GERMANY













пр. Луначарского, д. 49 Тел.: +7 (812) 438-16-73 (74) office@stomus.ru

ул. Павловская, д. 6, 5 эт., зона А Тел.: +7 (495) 669-78-72 Stomus-M@stomus.ru

### НОВОСИБИРСК

ул. Челюскинцев, д. 14/2, оф. 416 Тел.: +7 (383) 201-09-46 stomus-sibir@stomus.ru

ул. Попудренко, д. 52, оф. 413А Тел.: +38 (044) 586-59-60 (61) info.kiev@stomus.ru

### КРАСНОДАР

Тел.: +7 (921) 592-25-87 +7 (931) 208-90-95 stomus.krr@gmail.com

www.stomus.ru



- Коронкосниматель с плавным ходом и высокой точностью захвата.

риск повреждения существенно снижается.

- После разрезания коронки (размер бора для коронок 0,10 – 0,12) носик инструмента необходимо правильно установить (см. рис.) и аккуратно, приложив усилие, расширить коронку. Поскольку расширение коронки производится параллельно, то

- Коронкосниматель поставляется вместе с торцевым шестигранником для регулировки



## ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ




Диффузионное сверхпрочное и эластичное покрытие из карбида титана.

Иглодержатель твердый как гранит! Проверьте!

Благодаря специальному процессу обработки, ионы карбида титана не только покрывают рабочие части инструментов, но и проникают внутрь материала.


В результате такой обработки степень твёрдости увеличивается с обычных 48-52 HRC (по методу Роквелла) до 75-80 HRC. Благодаря чему чрезвычайно снижается износ поверхностей. Также практически устраняется риск возникновения трещин (характерный обычным твёрдосплавным инструментам) и деформации, что особенно важно при работе с очень тонкими иглодержателями.

Все инструменты серии ROCKHARD имеют синие ручки (кроме № 1112)

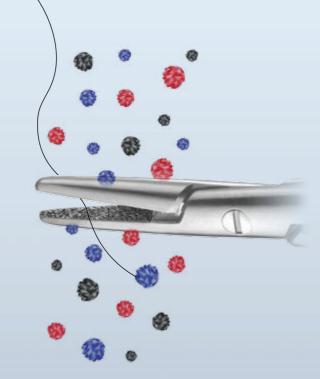

## Инструменты ROCKHARD



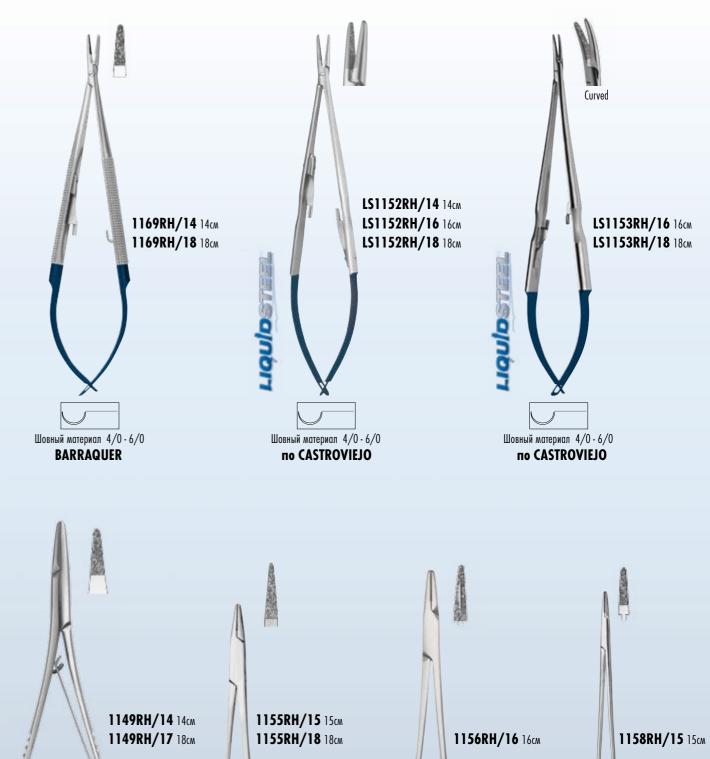

по CRILE WOOD сверхтонкие